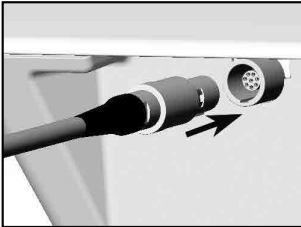





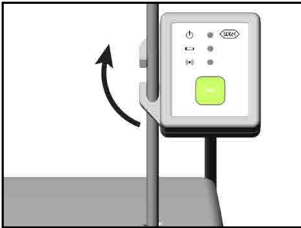
Kort brugsanvisning til SPI-dongle

Isætning/udtagning af SPI-donglen

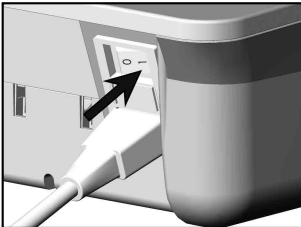


 Vær opmærksom på positioneringen!

❶ Sæt SPI-donglen i, eller tag SPI-donglen ud af styreenheden.



❷ Fastgør SPI-donglen på stativet, eller tag SPI-donglen af stativet.



❸ Tænd for styreenheden på netafbryderen.

Kort brugsanvisning til SPI-dongle

Samtidig brug af flere W&H-styreenheder

Tryk på den orange tast på fodkontrollen S-NW i 3 sekunder for at skifte mellem de forskellige styreenheder.

GRØN – SPI-dongle aktiveret

LED'en lyser, når SPI-donglen er sat i, og styreenheden er tændt.

ORANGE – batteri

LED'en blinker, når fodkontrollens batterier skal udskiftes.

BLÅ – kobling (parring)



Ved levering er fodkontrollen S-NW og SPI-donglen koblet med hinanden!

Ved aktiv kobling: LED'en blinker

Ved deaktiveret kobling:

- 1 Tryk på knappen på SPI-donglen i 4 sekunder.
- 2 LED'en blinker. SPI-donglen er i koblingstilstand i 30 sekunder.
- 3 Tryk samtidigt på den orange og den grønne tast på fodkontrollen S-NW i mindst tre sekunder.
- 4 LED'en blinker tre gang, når koblingen er gennemført.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

