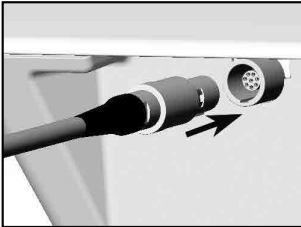





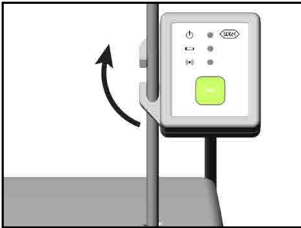
# Manual rápido del dongle SPI

## Insertar o retirar la llave SPI

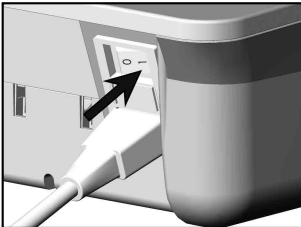


 Asegúrese de que la posición es la correcta.

❶ Inserte la llave SPI o desconecte la llave SPI de la unidad de control.



❷ Fije la llave SPI en la varilla para suero o extraiga la llave SPI de la varilla para suero.



❸ Encienda la unidad de control con el interruptor de red.

# Manual rápido del dongle SPI

## Uso simultáneo de varias unidades de control de W&H

Mantenga pulsado el botón naranja del pedal de control S-NW durante 3 segundos para cambiar entre las diferentes unidades de control.

### VERDE – Llave SPI activada

El LED está encendido cuando la llave SPI está insertada y la unidad de control está conectada.

### NARANJA – Pila

El LED parpadea si las pilas del pedal de control tienen que cambiarse.

### AZUL – Acoplamiento (emparejamiento)



Cuando el aparato se entrega de fábrica, el pedal de control S-NW y la llave SPI están acoplados.

Si el acoplamiento está activo, el LED parpadea.

Si el acoplamiento no está activo, siga estos pasos:

- 1 Presione el botón de la llave SPI durante 4 segundos.
- 2 El LED parpadea. La llave SPI permanece durante 30 segundos en el modo de acoplamiento.
- 3 Mantenga pulsados al mismo tiempo y durante al menos tres segundos el botón naranja y el verde del pedal de control S-NW.
- 4 El LED parpadea tres veces cuando el acoplamiento se ha realizado correctamente.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com wh.com

