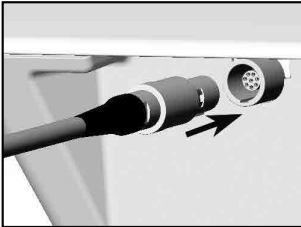





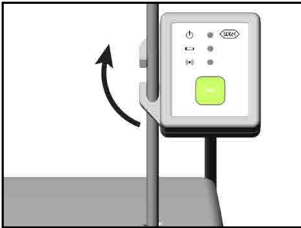
# Pikaopas, SPI-dongle

## SPI-donglen liittäminen/irrotus

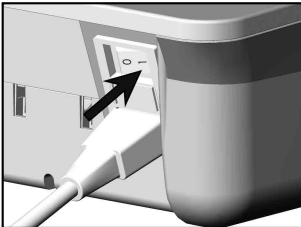


 Huomioi oikea asento!

❶ Liitä SPI-dongle tai irtikytkke SPI-dongle ohjauslaitteesta.



❷ Kiinnitä SPI-dongle jalustaan tai poista SPI-dongle jalustasta.



❸ Kytke ohjauslaite verkkokatkaisijan avulla päälle.

# Pikaopas, SPI-dongle

## Useamman W&H-ohjauslaitteen samanaikainen käyttö

Paina S-NW-jalkakytkimen oranssia painiketta 3 sekunnin ajan vaihdellaksesi yksittäisten ohjauslaitteiden välillä.

### VIHREÄ – SPI-dongle aktivoitu

LED palaa, kun SPI-dongle on liitetty ja ohjauslaite on kytketty päälle.

### ORANSSI – paristo

LED vilkkuu, kun jalkakytkimen paristot on vaihdettava.

### SININEN – kytkentä (parin muodostus)



Jalkakytkin S-NW ja SPI-dongle on kytketty yhteen toimitustilassa!

Kytkenän ollessa aktivoitu: LED vilkkuu

Kytkenän ollessa deaktivoitu:

- 1 Paina SPI-donglen painiketta 4 sekunnin ajan.
- 2 LED vilkkuu. SPI-dongle on 30 sekunnin ajan kytkentätilassa.
- 3 Paina samanaikaisesti vähintään 3 sekunnin ajan vihreää, oranssia ja keltaista S-NW-jalkakytkimen painiketta.
- 4 LED vilkkuu kolme kertaa onnistuneen kytkennän jälkeen.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com wh.com

