





Manuel abrégé pour le dongle SPI

Connexion / déconnexion du dongle SPI

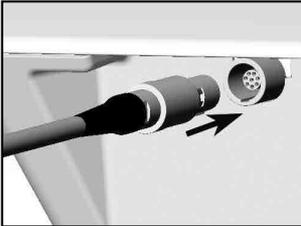


 Vérifiez le positionnement !

❶ Connectez le dongle SPI ou déconnectez le dongle SPI du boîtier de commande.

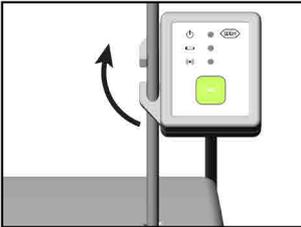

❷ Fixez le dongle SPI à la potence ou déconnectez le dongle SPI de la potence.

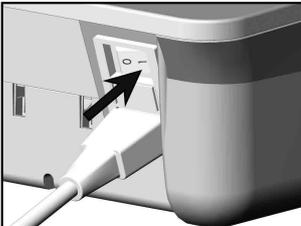

❸ Mettez en route le boîtier de commande avec l'interrupteur.

Manuel abrégé pour le dongle SPI

Utilisation simultanée de plusieurs boîtiers de commande W&H

Appuyez sur la touche orange de la commande au pied S-NW pendant 3 secondes pour basculer entre les boîtiers de commande.

VERT – Dongle SPI activé

La LED s'allume lorsque le dongle SPI est connecté et le boîtier de commande est sous tension.

ORANGE – Pile

La LED clignote lorsque les piles de la commande au pied doivent être remplacées.

BLEU – Couplage (pairage)



La commande au pied S-NW et le dongle SPI sont couplés à la livraison !

Si le couplage est actif : la LED clignote

Si le couplage est inactif :

- 1 Appuyez sur le bouton du dongle SPI pendant 4 secondes.
- 2 La LED clignote. Le dongle SPI est en mode couplage pendant 30 secondes.
- 3 Appuyez en même temps et pendant au moins trois secondes sur les touches verte et orange de la commande au pied S-NW.
- 4 La LED clignote trois fois si le couplage a réussi.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

