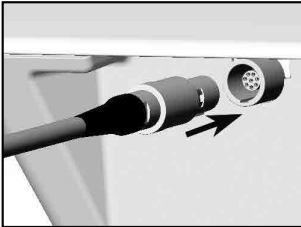





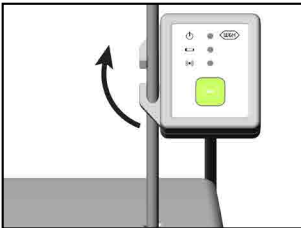
Skrócona instrukcja obsługi urządzenia synchronizującego SPI

Podłączanie / odłączanie urządzenia synchronizującego SPI

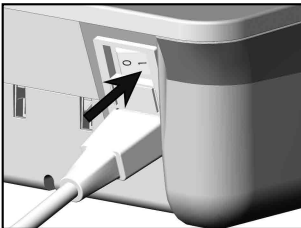


 Zwracać uwagę na pozycjonowanie!

❶ Wpiąć urządzenie synchronizujące SPI lub odłączyć urządzenie synchronizujące SPI od urządzenia sterującego.



❷ Zamocować urządzenie synchronizujące SPI na statywie lub zdjąć urządzenie synchronizujące SPI ze statywu.



❸ Włączyć urządzenie sterujące przy użyciu wyłącznika sieciowego.

Skrócona instrukcja obsługi urządzenia synchronizującego SPI

Jednoczesne korzystanie z kilku urządzeń sterujących W&H

Wciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy pomarańczowego przycisku sterownika nożnego S-NW pozwala na przełączanie między poszczególnymi urządzeniami sterującymi.

ZIELONY – urządzenie synchronizujące SPI aktywne

Dioda LED świeci, jeżeli urządzenie synchronizujące SPI jest podłączone i włączone jest urządzenie sterujące.

POMARAŃCZOWY – baterie

Dioda LED pulsuje, jeżeli konieczna jest wymiana baterii sterownika nożnego.

NIEBIESKI – parowanie



W momencie dostawy sterownik nożny S-NW i urządzenie synchronizujące SPI są ze sobą sparowane!

Przy aktywnym połączeniu: dioda LED pulsuje

Przy nieaktywnym połączeniu:

- 1 Nacisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy przycisk na urządzeniu synchronizującym SPI.
- 2 Dioda LED pulsuje. Urządzenie synchronizujące SPI znajduje się przez 30 sekund w trybie nawiązywania połączenia (parowania).
- 3 Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez co najmniej trzy sekundy pomarańczowy i zielony przycisk sterownika nożnego S-NW.
- 4 Pomyślne nawiązanie połączenia dioda LED sygnalizuje trzykrotnym pulsowaniem.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

