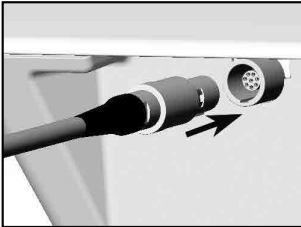





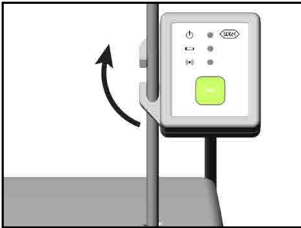
Snabbguide för SPI-dongel

Koppla på/avlägsna SPI-dongeln

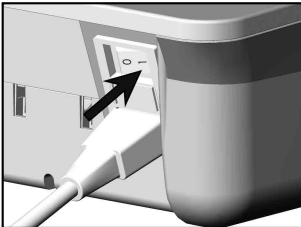


 Var noga med placeringen!

❶ Koppla på SPI-dongeln eller koppla ur SPI-dongeln från styrenheten.



❷ Fixera SPI-dongeln på stativet eller avlägsna SPI-dongeln från stativet.



❸ Slå på styrenheten med strömbrytaren.

Snabbguide för SPI-dongel

Samtidig användning av flera W&H-styrenheter

Tryck in den orange knappen på fotkontrollen S-NW i 3 sekunder för att växla mellan de enskilda styrenheterna.

GRÖN – SPI-dongeln aktiverad

LED lyser när SPI-dongeln är påkopplad och styrenheten är inkopplad.

ORANGE – Batteri

LED blinkar när batterierna till fotkontrollen måste bytas ut.

BLÅ – sammankoppling (pairing)



Fotkontrollen S-NW och SPI-dongeln är sammankopplade när de levereras!

Vid aktiv sammankoppling LED blinkar

Vid inaktiv sammankoppling

- 1 Tryck på knappen på SPI-dongeln i 4 sekunder.
- 2 LED blinkar. SPI-dongeln är i sammankopplingsläge i 30 sekunder.
- 3 Tryck samtidigt på den orange och gröna knappen på fotkontrollen S-NW i minst tre sekunder.
- 4 LED blinkar tre gånger efter lyckad sammankoppling.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

