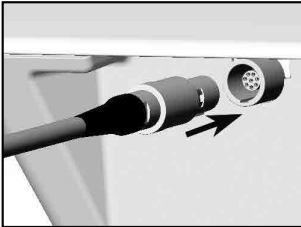





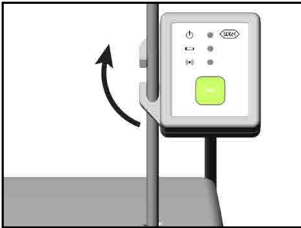
Kratka navodila za zaščitni ključ SPI

Nameščanje/snemanje zaščitnega ključa SPI

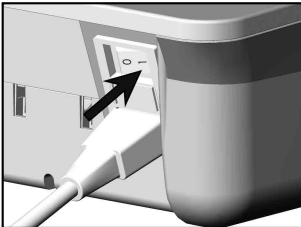


 Pazite na pravilni položaj.

❶ Namestite zaščitni ključ SPI ali ločite zaščitni ključ SPI od krmilnika.



❷ Pritrdite zaščitni ključ SPI na stojalo ali snemite zaščitni ključ SPI s stojala.



❸ Vklopite krmilno napravo z omrežnim stikalom.

Kratka navodila za zaščitni ključ SPI

Istočasna uporaba več krmilnih naprav W&H

3 sekunde pritiskajte oranžni gumb nožnega krmilnika S-NW, da preklopite med posameznimi krmilnimi napravami.

ZELENA – zaščitni ključ SPI aktiviran

Luč LED sveti, če je zaščitni ključ SPI nameščen in krmilna naprava vklopljena.

ORANŽNA – baterija

Luč LED utripa, če je treba zamenjati baterije nožnega krmilnika.

MODRA – spoj (Pairing)



Nožni krmilnik S-NW in zaščitni ključ SPI sta ob dobavi sklopljena!

Pri aktivnem spoju: luč LED utripa.

Pri neaktivnem spoju:

- 1 4 sekunde pritiskajte gumb na zaščitnem ključu SPI.
- 2 Luč LED utripa. Zaščitni ključ SPI je 30 sekund v načinu spoja.
- 3 Najmanj tri sekunde istočasno pritiskajte oranžni in zeleni gumb nožnega krmilnika S-NW.
- 4 Luč LED po uspešnem spoju trikrat utripne.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

