


Istruzioni di impiego

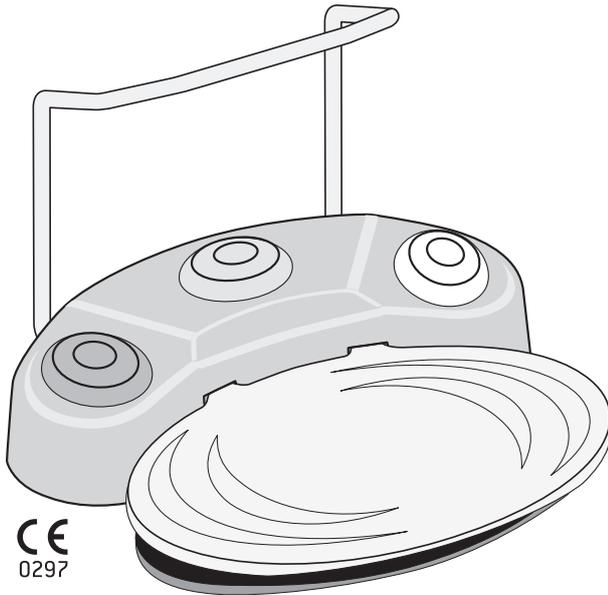

CE
0297

**Controllo al piede
a regolazione variabile**

S-N1

Indice

Simboli W&H	3
1. Introduzione	4 – 6
2. Dotazione	7
3. Inserire / togliere la staffa	8
Certificato di garanzia	10
Partner di Assistenza Autorizzati W&H	11

Simboli W&H

Simboli presenti nelle istruzioni di impiego



ATTENZIONE!

(se vi è pericolo di lesioni alle persone)



ATTENZIONE!

(se vi è pericolo di danno alle cose)



Delucidazioni generali,
senza pericolo per persone o cose

1. Introduzione



La soddisfazione del cliente è al primo posto della politica di qualità W&H. Questo prodotto W&H è stato sviluppato, prodotto e controllato in conformità alle leggi e normative in vigore.



Utilizzare il controllo al piede esclusivamente

- > con le apparecchiature indicate in queste istruzioni di impiego
- > in accordo con le istruzioni di impiego della singola unità motrice



Attenersi ai seguenti capitoli delle istruzioni di impiego delle singole unità motrice:

- > Simboli
- > Introduzione
- > Avvertenze di sicurezza
- > Messa in funzione
- > Descrizione / Messa in funzione del controllo al piede
- > Igiene e manutenzione
- > Accessori
- > Service
- > Dati tecnici
- > Riciclaggio e smaltimento

Introduzione

Destinazione d'uso

Controllo al piede a regolazione variabile per apparecchiature con unità motrice meccanica.



Un uso diverso dalla destinazione prevista può danneggiare il controllo al piede e causare rischi e pericoli per i pazienti, per l'utilizzatore e terzi.



Uso non conforme

L'uso non conforme, nonché modalità di installazione, modifiche o riparazioni del controllo al piede non consentite oppure l'inosservanza delle nostre istruzioni, ci esonerano da qualsiasi prestazione di garanzia o altre rivendicazioni.



Controllo al piede

Il controllo al piede può essere utilizzato in Zona M (AP) conformemente alle normative IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1.

La Zona M è costituita da una piramide tronca posta al di sotto del tavolo operatorio inclinata di 30° verso l'esterno.

La **zona M**, denominata anche »area medica«, comprende la parte di un locale in cui si possono formare atmosfere potenzialmente esplosive a causa dell'uso di sostanze anestetiche, medicinali antisettici e detergenti antibatterici, seppur solo in quantità ridotte e per brevi intervalli.

Introduzione



Produzione conforme alla direttiva UE

Il controllo al piede è un dispositivo medico secondo la Direttiva UE 93/42/CEE ed è compatibile con le seguenti unità motrici:

Modelli	Denominazione
SI-95	Implantmed, DU900, OsseoSet™ 100, Frios® Unit S
SA-200 / SA-200 C	Elcomed
SI-923, SI-915	Implantmed, BTI DrillTech®, Implant Unit, Ism, Surgical Motor System, OSM2, MIS MCU, DU1000, Frios® Unit S/i, OsseoSet 200, Set chirurgico Osscora
SA-310	Elcomed
PA-123 / PA-115	Tigon+



Responsabilità del produttore

Il produttore si considera responsabile per conseguenze su sicurezza, affidabilità e prestazioni del controllo al piede, esclusivamente a condizione che siano state osservate le seguenti avvertenze:

- > Utilizzare il controllo al piede solo in conformità alle presenti istruzioni di impiego e alle istruzioni delle singole unità motrici.
- > Il controllo al piede non contiene parti riparabili dall'utilizzatore. Modifiche o riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da Partner di Assistenza Autorizzati W&H (v. pag. 11).
- > L'apertura non autorizzata del controllo al piede causa l'invalidazione della garanzia e di ogni altra pretesa.

2. Dotazione

Modelli SI-95 (Implantmed, DU900, OsseoSet™ 100, Frios® Unit S)
Tipen SA-200, SA-200 C (Elcomed)

Controllo al piede S-N1, REF 05083300

Modelli SI-923, SI-915 (Implantmed REF 00900100 / 00900101 / 00900102 / 00900103 / 00900104 / 00900105 / 00900106 / 00900107), BTI DrillTech®, Implant Unit, Ism, Surgical Motor System, OSM2, MIS MCU, DU1000, Frios® Unit S/i, OsseoSet 200, Set chirurgico Osscora)

Controllo al piede S-N1, REF 05046200

Modello SA-310 (Elcomed)
Modelli SI-923, SI-915 (Implantmed REF 16929000 / 16929001)

Controllo al piede S-N1, REF 06202400


Modelli PA-123, PA-115 (Tigon+)

Controllo al piede S-N1, REF 06382200

Per tutti i modelli indicati

Staffa, REF 04653500


3. Inserire / togliere la staffa

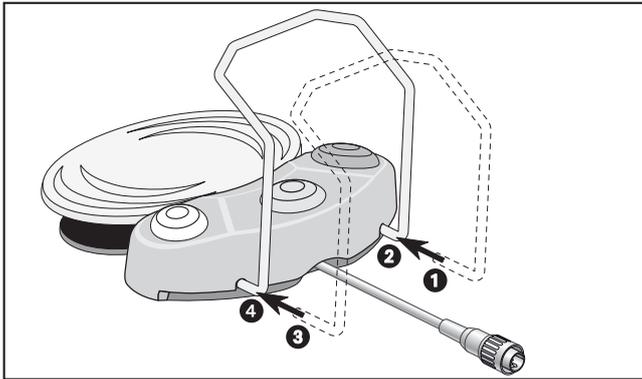

Inserire la staffa

 Ruotare il controllo al piede di 180°.

- 1 Posizionare una guida della staffa nei foro del controllo al piede.
- 2 Inserire la staffa fino all'arresto.
- 3 Posizionare la secondo guide della staffa nei foro del controllo al piede.
- 4 Inserire la staffa fino all'arresto.

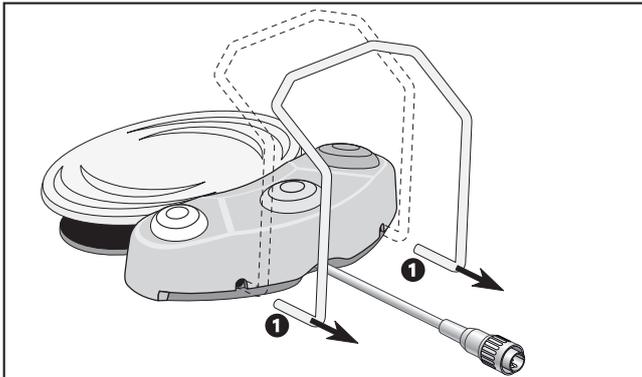

Togliere la staffa

- 1 Sfilare la staffa.

Certificato di garanzia

Questo prodotto W&H è stato realizzato da personale specializzato W&H con la massima cura. Controlli e collaudi garantiscono una funzione ineccepibile. La garanzia prende effetto solo a condizione che vengano osservate tutte le indicazioni delle allegate istruzioni di impiego.

Quale produttore W&H presta garanzia di 12 mesi a partire dalla data di acquisto per difetti dei materiali o di fabbricazione.

Non assumiamo responsabilità per danni dovuti ad uso non conforme o riparazioni eseguite da terzi non autorizzati da W&H!

Prestazioni in garanzia vanno richieste – allegando copia del documento di acquisto – al venditore o a un Partner di Assistenza Autorizzato W&H. L'esecuzione di una prestazione in garanzia non allunga il periodo di garanzia né dà luogo ad una nuova garanzia.

12 mesi di garanzia

Partner di Assistenza Autorizzati W&H

Visitate il sito W&H all'indirizzo <http://wh.com>

Nel menu »Service« è possibile trovare il Partner di Assistenza Autorizzato W&H più vicino.

Se non si dispone di accesso a Internet, contattare

W&H Italia S.r.l., Via Bolgara, 2, I-24060 Brusaporto (BG)

t + 39 035 66 63 911, f + 39 035 66 63 939, E-Mail: assistenza.tecnica@wh.com

W&H CH-AG, Industriepark 9, CH-8610 Uster ZH

t + 41 43 4978484, f + 41 43 4978488, E-Mail: service.ch@wh.com

Produttore

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, **Austria**

t + 43 6274 6236-0, **f** + 43 6274 6236-55
office@wh.com **wh.com**

Form-Nr. 50587 AIT
Rev. 001 / 16.01.2012
Con riserva di modifiche

