

SciCan

# HYDRIM® C61wd G4

REINIGUNGS- UND DESINFektionsGERÄT FÜR INSTRUMENTE

- Benutzerhandbuch - USB



# Inhalt

<b>1. Einleitung .....</b>	<b>3</b>	<b>4. Einsatz Ihres HYDR/IM .....</b>	<b>19</b>
<b>2. Wichtige Informationen .....</b>	<b>4</b>	Empfehlungen zur Aufbereitung von	
Haftungsausschluss		Instrumenten	
Übersicht Gerät		Programm-Übersicht	
Übersicht Touchscreen		Körbe und Zubehör	
Übersicht Set-up-Menü		Hinweise und Tipps für optimale	
<b>3. Inbetriebnahme Ihres HYDR/IM .....</b>	<b>8</b>	Reinigungsergebnisse	
Installation		Empfohlene Beladung	
Handhabung und Einsetzen der HIP™ Ultra		Zyklus starten	
Reinigungslösung		Zyklus unterbrechen / abbrechen	
Wasserqualität		Zusätzliche Funktionen des Benutzer- und	
Wasserqualität testen		Einrichtungsmenüs	
Entsorgung von Verpackung und		Tür bei Stromausfall öffnen	
stillgelegten Geräten		<b>5. Zyklusinformationen speichern</b>	<b>29</b>
Sprache einstellen		<b>und abfragen .....</b>	
Land einstellen		Zyklusinformationen über den	
Zeit einstellen		Touchscreen abfragen	
Datum einstellen		Zyklusinformationen aus der	
Geräteerkennung zuordnen		USB-Datensicherung abfragen	
Zähler Trockner zurücksetzen		<b>6. Pflege und Wartung .....</b>	<b>31</b>
Innenreinigungszähler zurücksetzen		HIP™ Ultra Reinigungslösung ersetzen	
Bildschirmschonerverzögerung einstellen		Salzvorrat des Wasserenthärter nachfüllen	
Temperaturanzeige einstellen		Luftfilter austauschen	
Tastenton EIN oder AUS schalten		Wartung von Filter und Wascharm	
Signaltonlautstärke einstellen		Reinigung des Gerätes	
Wasserenthärter einstellen		Gerät für den Transport vorbereiten	
Bildschirmkontrast einstellen		Jährliche Wartung	
Einstellungen Touchscreen-Anzeige ändern		Überprüfung und Validierung des Gerätes	
Benutzername anlegen		<b>7. Fehlerbehebung .....</b>	<b>38</b>
Benutzer-PIN festlegen		Fehlerbehebung allgemeiner Probleme	
Passwort-Freigabe einrichten		Behandlung von Fehlermeldungen	
LAN-Verbindung herstellen		<b>8. Garantie .....</b>	<b>43</b>
WLAN-Verbindung herstellen		<b>9. Spezifikationen .....</b>	<b>44</b>
		<b>10. SciCan Software-Produktlizenz ...</b>	<b>45</b>
		<b>11. Wifi - Rechtliche Informationen ...</b>	<b>53</b>

HYDR/IM und STAT/IM sind eingetragene Warenzeichen der SciCan Ltd. BRAVO, HIP und Sys™ sind Warenzeichen der SciCan Ltd. Alle anderen in diesem Handbuch verwendeten Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

## Für alle Service- und Reparaturanfragen:

In Kanada 1-800-870-7777  
Vereinigte Staaten: 1-800-572-1211  
Deutschland: +49 (0)7561 98343 - 0  
International: (416) 446-4500  
Email: techservice.ca@scican.com

Hergestellt von:

**SciCan**

1440 Don Mills Road,  
Toronto ON M3B 3P9  
CANADA

Telefon: (416) 445-1600  
Fax: (416) 445-2727  
Gebührenfrei: 1-800-667-7733



0 1 2 3


## EU-Vertretung

SciCan GmbH  
Wangener Strasse 78  
88299 Leutkirch GERMANY  
Telefon: +49 (0)7561 98343 - 0  
Fax: +49 (0)7561 98343 - 699

## SciCan Medtech

Alpenstrasse 14  
6300 ZUG SWITZERLAND  
Telefon: +41 (0) 41 727 7027  
Fax: +41 (0) 41 727 7029

# 1 Einführung

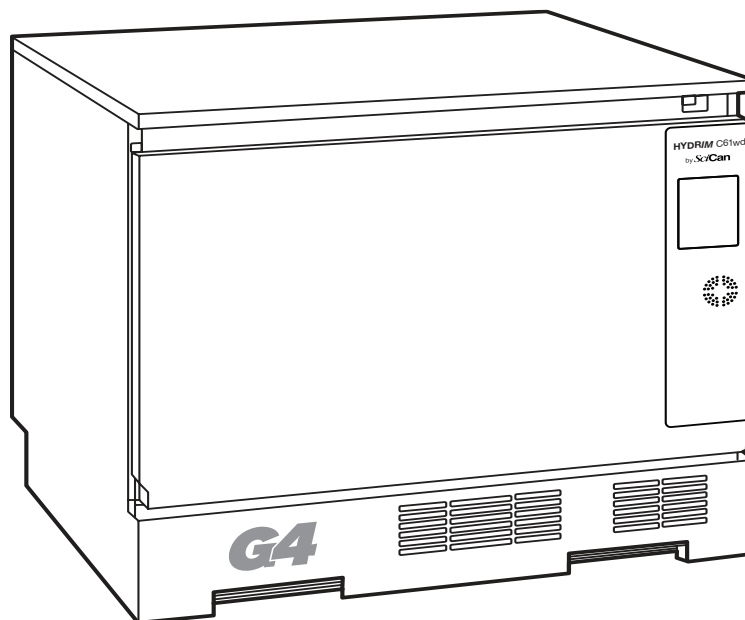

Vielen Dank, dass Sie sich für das Instrumentenreinigungs- und Desinfektionsgerät HYDRIM C61wd G4 entschieden haben. Der HYDRIM C61wd G4 wurde gemäß den internationalen Standards ISO 15883-1 und -2 für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte gebaut und ergänzt die Autoklaven STATIM® und BRAVO™, indem er die verschmutzten Instrumente schnell und hygienisch für die Sterilisation vorbereitet. Weiterhin hat die HYDRIM C61wd G4 auch die SVGW-Zulassung in Europe sowie die WRAS-Zulassung in Großbritannien erhalten. Um einen jahrelangen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Der HYDRIM C61wd G4 ist nur für die in diesem Handbuch genannten Anwendungen geeignet. Die Benutzung des HYDRIM für andere Zwecke kann gefährlich sein. Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.



Für ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes müssen die Anweisungen für Betrieb, Wartung und Austausch eingehalten werden. Alle in diesem Handbuch verwendeten Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden, um Änderungen und Verbesserungen am Produkt HYDRIM wiederzugeben.



Der HYDRIM sollte nur von einem qualifizierten Vertragspartner installiert und gewartet werden, da das Gerät der Installationskategorie II angehört. Vor dem Anschluss des Geräts sollte der Installateur prüfen, dass Netzspannung und Frequenz der Stromversorgung den Angaben in den Installationsanweisungen entsprechen. Das Gerät darf nur an einer geerdeten Steckdose betrieben werden. Beachten Sie bitte, dass das Gerät nur dann völlig vom Netz getrennt ist, wenn der Stecker gezogen wurde oder der Hauptschalter auf AUS geschaltet ist. Vor allen Arbeiten am Gerät muss dieses vom Netz getrennt sein.



Der HYDRIM C61wd G4 verwendet ausschließlich die Reinigungslösung HIP™ Ultra von SciCan. Das Gerät arbeitet möglicherweise nicht wie beschrieben, wenn andere Reinigungsmittel verwendet werden. Andere Reinigungsmittel können zu Beschädigungen am Gerät und den Instrumenten, zu übermäßiger Schaumbildung und zum Ausschluss der Gewährleistung führen. Verwenden Sie in diesem Gerät keine Lösungsmittel. Gestatten Sie Unbefugten keinen Zugang zum Gerät und seiner Steuerung.



## 2 Wichtige Informationen

### 2.1 Haftungsausschluss

Beziehen Sie Teile für Wartung und Reparaturen Ihres HYDR/IM nur von autorisierten Personen. SciCan haftet nicht für zufällige, ungewöhnliche oder mittelbare Schäden einschließlich entgangener Gewinne und Umsätze, wirtschaftlicher Verluste oder für Verluste infolge von Personenschäden, die durch Wartungs- oder Reparaturarbeiten an dem HYDR/IM durch unbefugtes Personal oder den Einsatz von Ersatzteilen von Fremdherstellern entstanden sind.



Entfernen Sie die Maschinenverkleidung nicht und führen Sie keine Teile oder Gegenstände durch die Öffnungen in das Geräteinnere. Dies könnte Schäden am Gerät verursachen oder eine Gefahr für den Anwender oder Dritte darstellen.



Bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch ist die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.



Reinigungslösungen können Reizungen von Augen Haut und Mund verursachen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt durch Verwendung geeigneter Schutzmaßnahmen.



Sitzen, stehen oder lehnen Sie niemals an der geöffneten Tür. Das Gerät kann nach vorne kippen und Verletzungen verursachen.



Vor Nachfüllen des Enthärter Salz, befüllen mit Reinigungslösung oder Wartungsarbeiten muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Schalten Sie den Hauptschalter aus.



Das Gerät darf nur durch geschultes und berechtigtes Personal bedient und in Betrieb genommen werden. Beachten Sie die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien für den Betrieb von Medizinprodukten.




SciCan empfiehlt, das Gerät stets EIN geschaltet zu lassen, insbesondere wenn kein Personal in der Praxis ist oder kein Wasserventilverschluss installiert ist. Wenn das Gerät EIN geschaltet bleibt, wird die Abwasserpumpe aktiviert, falls durch einen anderen Fehler Wasser in die Kammer gelangt.


Sämtliche schwerwiegenden Vorfälle sollten dem Hersteller und/oder der zuständigen Behörde aus dem Gebiet, in dem der Anwender und/oder Patient wohnt, gemeldet werden.

# 2 Wichtige Informationen

## 2.2 HYDRIM-Übersicht Gerät

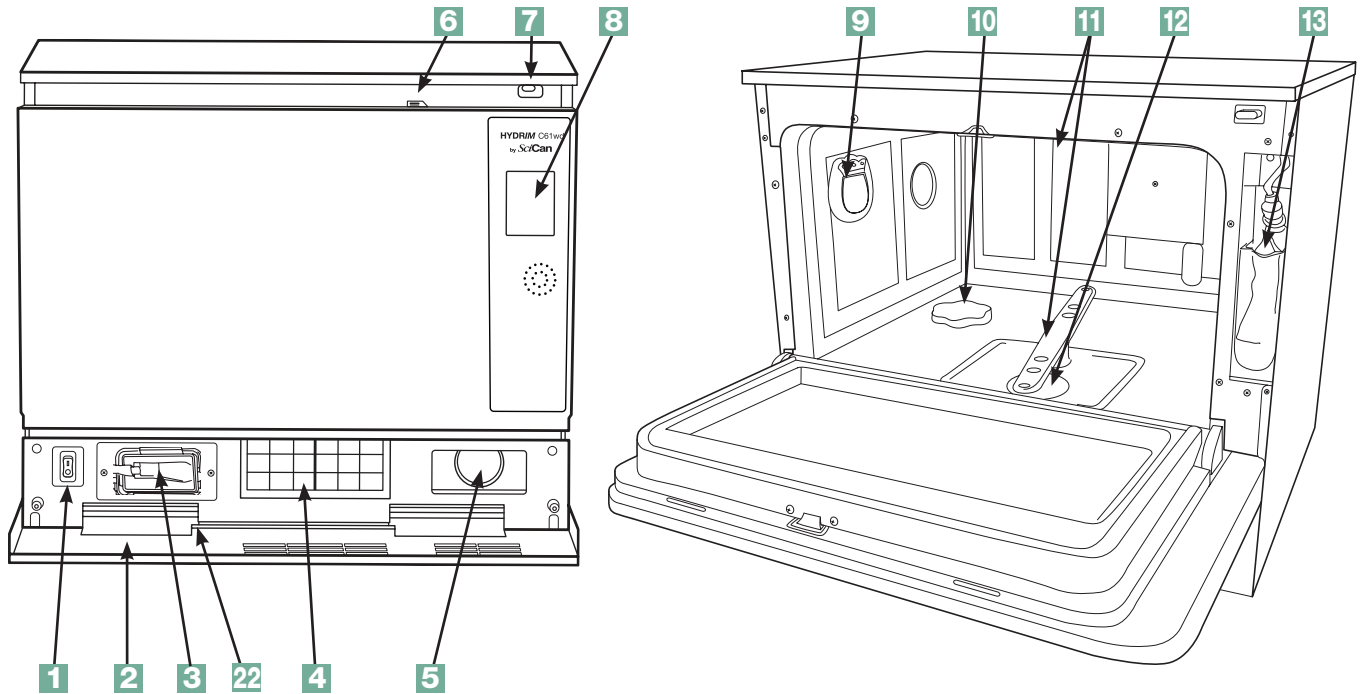

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1</b> Hauptschalter                                    | <b>8</b> LCD-Touchscreen                        | <b>15</b> Ethernet-Anschluss                          |
| <b>2</b> Frontabdeckung unten                             | <b>9</b> Trockner-Auslass                       | <b>16</b> RS232 Schnittstelle                         |
| <b>3</b> Bakteriologischer Luftfilter<br>(wenn eingebaut) | <b>10</b> Wasserenthärter                       | <b>17</b> Kaltwasserzulauf                            |
| <b>4</b> HEPA-Filter (Sterilluftfilter)                   | <b>11</b> Wascharme<br>(oben nicht dargestellt) | <b>18</b> Warmwasserzulauf                            |
| <b>5</b> Trockner-Abluft                                  | <b>12</b> Grobpartikelfilter                    | <b>19</b> R/O Wasserzulauf                            |
| <b>6</b> Türgriff   | <b>13</b> Reinigungslösung<br>und Einschub      | <b>20</b> Sicherungen                                 |
| <b>7</b> USB-Anschluss                                    | <b>14</b> Ablauf                                | <b>21</b> Netzkabelanschluss                          |
|   |   | <b>22</b> Ablaufrohr (hinter<br>Frontabdeckung unten) |

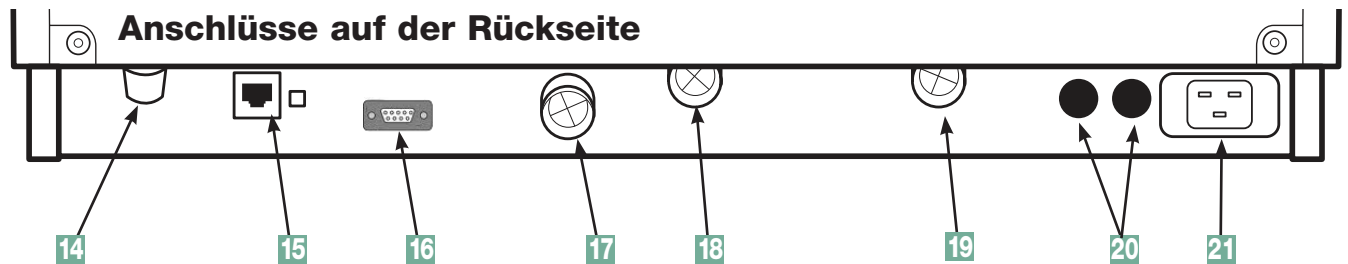

Folgende Symbole erscheinen auf den Rändern dieses Handbuchs.



Eine mögliche Gefahr für den Bediener.



Eine Situation, die zu einem mechanischen Schaden führen kann.



Wichtige Information.

Folgende Symbole gibt es am Gerät:




Vorsicht: Heiße Oberfläche und/oder heißer Dampf.



Vorsicht: Gefahr eines elektrischen Schlags. Trennen Sie die Stromversorgung vor den Servicearbeiten.



Vorsicht: Sehen Sie zu Details im Handbuch nach.

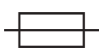


Austausch darf nur durch Sicherungen des Typs F mit 15 A, 250 V erfolgen, um weiterhin gegen das Risiko eines Brandes zu schützen.



Medizinprodukt


# 2 Wichtige Informationen

## 2.3 Übersicht Touchscreen

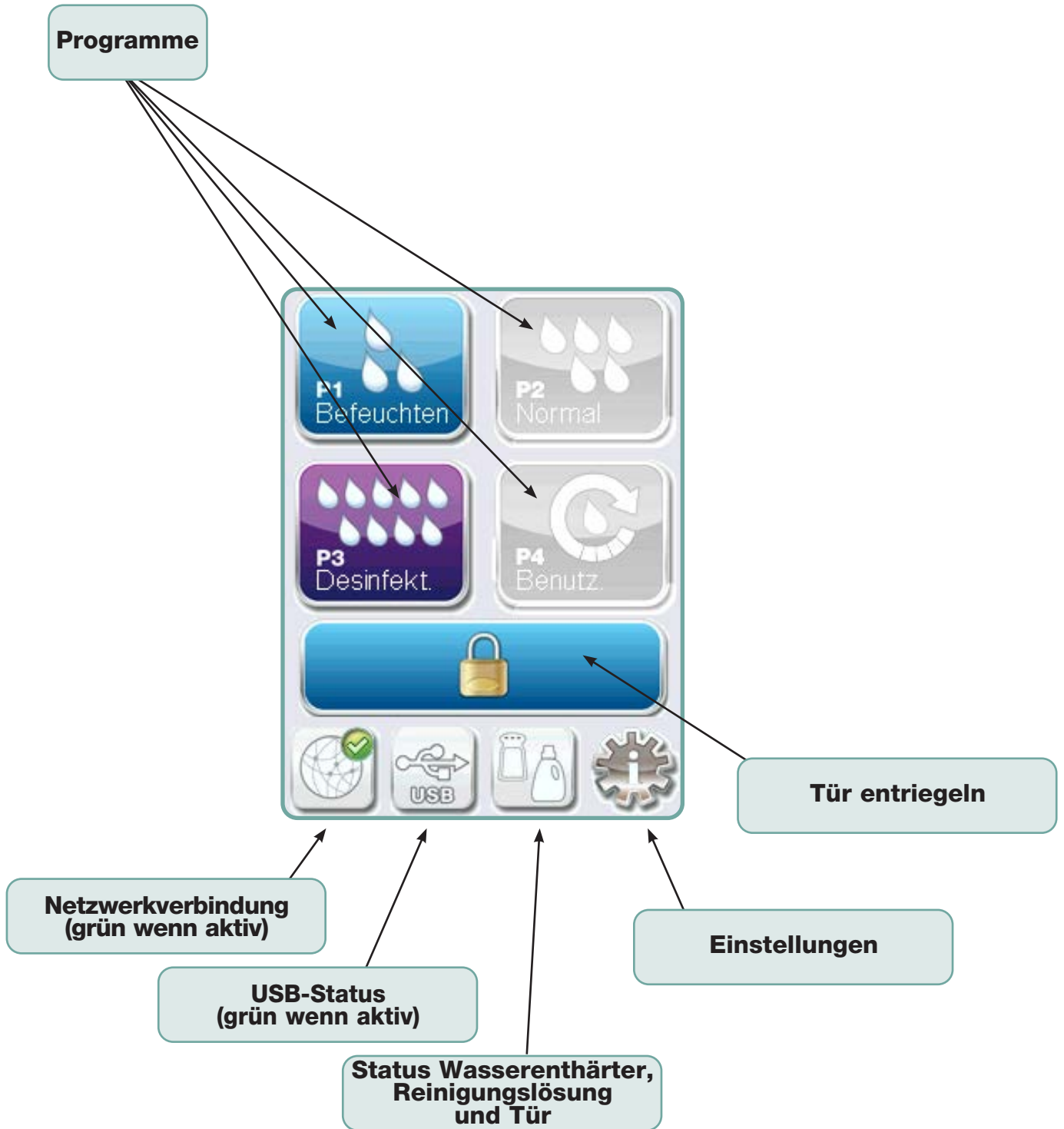

# 2 Wichtige Informationen

## 2.4 Übersicht Set-up-Menü

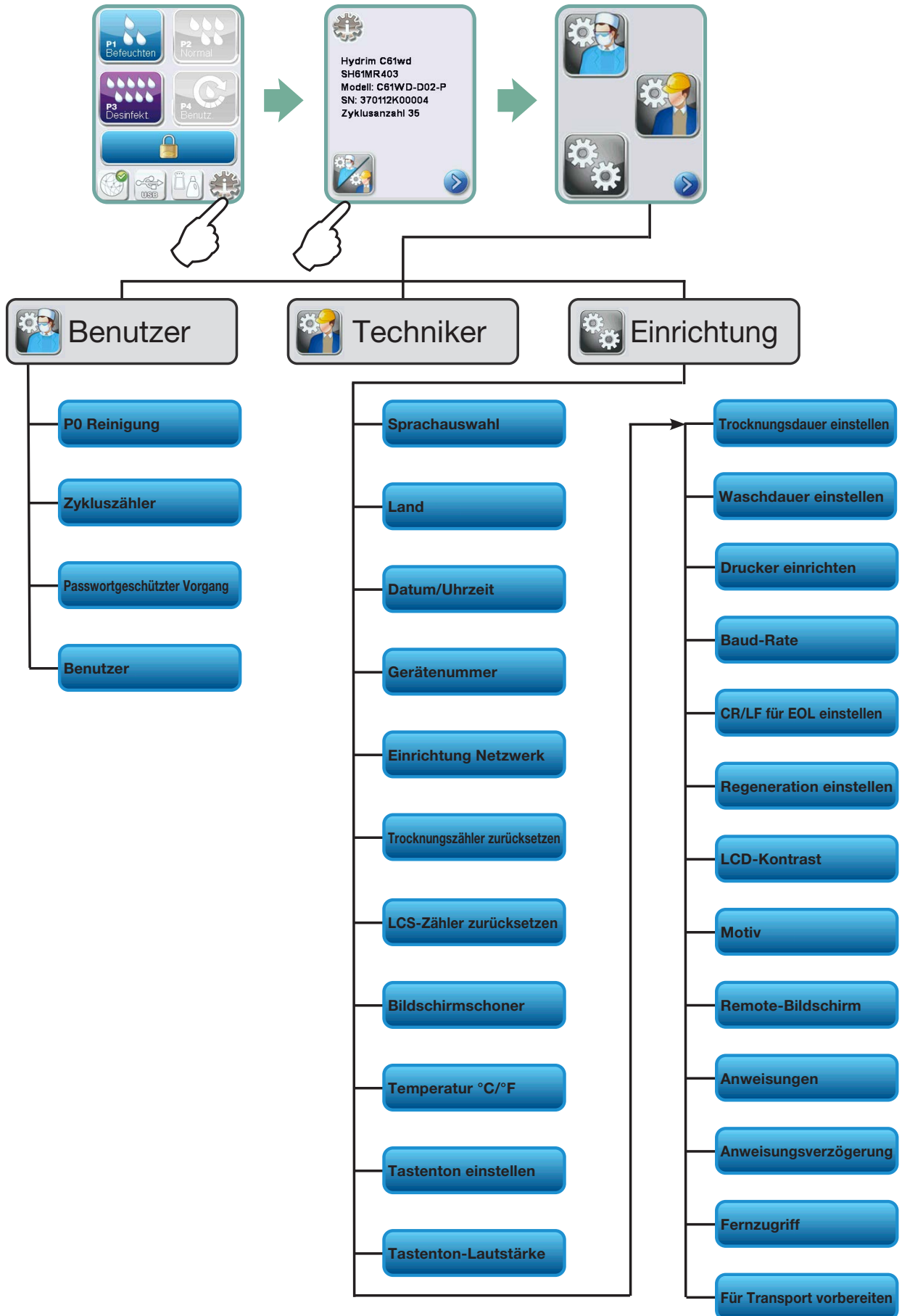

# 3. Inbetriebnahme Ihres HYDRIM

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Um die Waschkammer zu öffnen, wenn die Tür verriegelt ist und das Gerät nicht funktioniert, lösen Sie den Hebel an der oberen Türkante und ziehen Sie die Tür auf. (Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4.9 Tür bei einem Stromausfall öffnen.)
- Stellen Sie sicher, dass die HIP™ Ultra Reinigungslösung (Instrumentenwasch-Chemikalie) zur Verfügung steht. Alle anderen Betriebsstoffe werden mit dem Gerät geliefert.
- Der HYDRIM C61wd G4 ist schwer (44 kg). Bewegen Sie das Gerät mit Vorsicht.
- Der HYDRIM C61wd G4 muss richtig geerdet sein.
- Der HYDRIM C61wd G4 verfügt über eine freie Fließstrecke, um den Rückfluss von Schmutzwasser in die Wasserversorgung zu verhindern. Es sind keine weiteren Ventile erforderlich.

### 3.1 Installation

Die Installation darf nur durch einen von SciCan autorisierten Techniker erfolgen. Sollten Arbeiten von einem nicht autorisierten Techniker durchgeführt werden kann sich dies negativ auf den Garantie-Anspruch auswirken. Von Ihrem Händler sollten Sie eine separate Vorinstallations-Checkliste erhalten haben. Bitte beachten Sie diese vor der Installation des Gerätes.

Wenn der HYDRIM C61wd G4 in eine Hygienezeile eingebaut wird, muss der Hersteller der Hygienezeile oben, hinten und an beiden Seiten des Gerätes ausreichend Platz vorsehen, um die Installation, Justierung und den Wartungszugang zum Gerät zu erleichtern.



Bewegen Sie den HYDRIM C61wd G4 nicht durch Ziehen an der offenen Tür. Das kann zu einer Fehlstellung der Tür und zur Undichtheit führen.

Bei der Installation sollten alle Verbrauchsmaterialien vorschriftsgemäß in die Maschine gefüllt werden. Es ist wichtig dies vor Inbetriebnahme des Gerätes zu überprüfen.

### 3.2 Handhabung und Einsetzen der HIP™ Ultra Reinigungslösung

Die HIP™ Ultra Reinigungslösung wird in verdünnter Form als Waschmittel für die Reinigung chirurgischer Instrumente in den HYDRIM Reinigungs- sowie Reinigungs- und Desinfektionsgeräten verwendet. Es handelt sich hierbei um eine farblose und nahezu geruchlose Flüssigkeit, die in Wasser vollständig löslich ist.

Der pH-Wert liegt im Bereich von 9,3 – 9,8, so dass die Lösung leicht alkalisch ist. Daher ist es wichtig, dass beim Einsetzen der Lösung in die Maschine sowie beim Entfernen und Entsorgen des leeren Behälters bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.



### 3. Inbetriebnahme Ihres HYDR/M




Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des sicheren Umgangs mit der HIP™ Ultra Reinigungslösung.


- Tragen Sie stets unbeschädigte Handschuhe aus Natur- oder Butylkautschuk, Nitril oder Neopren (ideal sind medizinische Handschuhe).
- Tragen Sie stets einen Augenschutz.
- Schützen Sie die Haut an den Armen.
- Falls Lösung auf die Kleidung gelangt, entfernen Sie das Kleidungsstück und waschen Sie die betroffene Hautstelle mit reichlich Wasser gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt.
- Beachten Sie beim Umgang mit diesem Produkt die üblichen Hygienepraktiken und essen und trinken Sie nicht.
- Nach dem Umgang mit dem Produkt ziehen Sie die Handschuhe aus, entsorgen diese und waschen die Hände, bevor Sie den Augenschutz abnehmen.
- Verwenden Sie beim Umgang mit HIP™ Produkten nicht jene persönliche Schutzausrüstung, die Sie für medizinische Arbeiten verwenden.
- Stellen Sie stets sicher, dass persönliche Schutzausrüstung nach dem Kontakt mit der HIP™ Ultra Reinigungslösung entweder gereinigt oder entsorgt wird.

Für weitere Daten zur HIP™ Ultra Reinigungslösung besuchen Sie die Webseite [SciCan.com](http://SciCan.com), um eine PDF-Datei des Sicherheitsdatenblatts anzusehen oder herunterzuladen.


Zum Einsetzen des Beutels mit der HIP™ Ultra Reinigungslösung befolgen Sie diese Schritte:

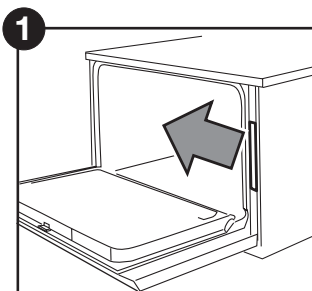


**1** Schalten Sie das Gerät AUS, öffnen Sie die Tür und ziehen Sie das Chemikalienschubfach heraus.

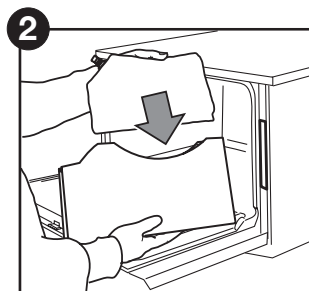

**2** Setzen Sie einen neuen Beutel in das Chemikalienschubfach ein.

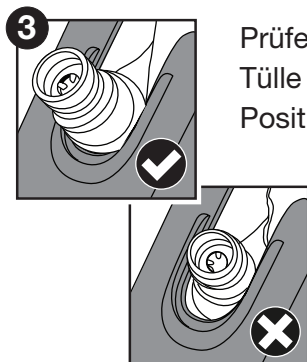

**3** Prüfen Sie, dass die Tülle in der richtigen Position ist.

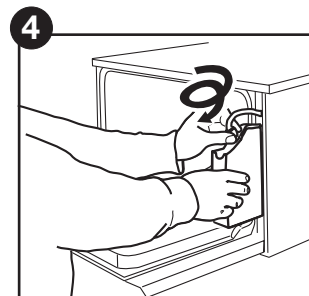

**4** Verbinden Sie den neuen Beutel, schließen die Tür und schalten Sie das Gerät EIN.

## 3. Inbetriebnahme Ihres HYDR/M

### 3.3 Wasserqualität

Die Qualität des im HYDR/M zur Reinigung der Instrumente verwendeten Wassers ist von größter Bedeutung, um zufriedenstellende Reinigungsergebnisse zu erzielen und die Instrumente, sowie das Geräteinnere vor Beschädigungen zu schützen.

Trinkwasser enthält normalerweise viele gelöste Feststoffe. Die Menge gelöster Stoffe hängt stark von den natürlichen geologischen Gegebenheiten vor Ort ab und kann die Ursache von Verfärbungen, Flecken und Korrosion an den Instrumenten und den inneren Teilen des HYDR/M sein. Eisen, Mangan, Chlorid und Kalziumkarbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) gehören zu den gelösten Feststoffen, welche die Reinigungsergebnisse bei der Verwendung eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes beeinflussen können.

Eisen und Mangan können orangefarbene, braune oder schwarze Verfärbungen auf den Instrumenten und den inneren Teilen des HYDR/M verursachen. Chlorid kann Flecken, Lochfraß und Ablagerungen hervorrufen. Falls die Instrumente oder inneren Teile des HYDR/M C61wd, wie beispielsweise die Kammer, derartige Flecke oder Verfärbungen zeigen, kann ein Wassertest zur Bestimmung der Ursache erforderlich sein. Die Installation eines Wasseraufbereitungssystems kann erforderlich werden, um die Menge der gelösten Feststoffe im Wasser zu reduzieren und die Reinigungsergebnisse des HYDR/M zu verbessern.

Kalziumkarbonat ist die Hauptursache harten Wassers und hinterlässt weiße Flecke oder Ablagerungen. Der HYDR/M verfügt über ein integriertes Wasserenthärtungssystem, das auf die örtliche Wasserhärte eingestellt werden muss. Die empfohlenen Regenerierungseinstellungen finden Sie in Kapitel 3.4 dieses Handbuchs.

SciCan empfiehlt, vor der Verwendung des HYDR/M die Wasserqualität zu testen und die Ergebnisse für Wasserhärte, pH-Wert und Leitfähigkeit für späteren Nachweis in den Vorinstallations- und Installations-Dokumenten zu erfassen.

**WICHTIG:** Das Wasserenthärtungssystem des HYDR/M verringert die Wasserhärte durch Entzug von Kalziumkarbonat. Falls Ihre Wassertests eine Wasserhärte außerhalb des Einstellbereichs des Gerätes ergeben oder wenn im Wasser gelöste Feststoffe Verfärbungen oder Ablagerungen auf den Instrumenten oder in der Kammer verursachen, kann eine externe Wasserenthärtungsanlage notwendig sein.

# 3. Inbetriebnahme Ihres HYDR/M

## 3.4 Wasserqualität testen

Der HYDR/M C61wd G4 verfügt über ein eingebautes Wasserenthärtungssystem, das auf die örtliche Wasserhärte eingestellt werden muss. Ihre örtliche Wasserhärte bestimmen Sie folgendermaßen:

- Der im Lieferumfang des HYDR/M enthaltene Wassertestsatz enthält drei einzeln verpackte Teststreifen für Wasserhärte. Nehmen Sie eine Wasserprobe vom Installationsort der Maschine.
- Öffnen Sie einen der Beutel, entnehmen den Teststreifen und tauchen Sie ihn ins Wasser.
- Vergleichen Sie die Farbe des Streifens mit der Abbildung auf der Beutelnrückseite und bestimmen Sie die Wasserhärte entsprechend der Abbildung auf der Verpackung des Wassertestsatzes.
- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie im Hauptmenü die Taste Einstellungen.
- Gehen Sie zum Setup-Menü und wählen „Regeneration einstellen“.
- Stellen Sie das Regenerierungslevel mit den Pfeiltasten gemäß der Wasserhärte-tabelle in diesem Abschnitt ein. Falls Ihre Wasserhärte zwischen zwei Einstellungen fällt, wählen Sie die höhere Einstellung.
- Schrauben Sie den Deckel von der Öffnung für den Wasserenthärter - links im Boden der Kammer - ab und gießen Sie 0,5 Liter Wasser in die Öffnung für den Wasserenthärter.
- Füllen Sie in die Öffnung für den Wasserenthärter 0,5 kg Enthärtersalz. Verwenden Sie dafür den mitgelieferten Trichter, um zu vermeiden dass Salz in die Kammer gelangt. Schrauben Sie den Deckel wieder fest zu, um Korrosion zu vermeiden.

Wasserhärteumrechnung und Salzregenerationsstufen

	°dH	US GPG	PPM (mg CaCO <sub>3</sub> / Litre)	Regen.
In Ordnung Keine externe Enthärtungsanlage nötig (Werte von 18-143)	1	1.0	18	1
	2	2.1	36	
	3	3.1	54	
	4	4.2	71	
	5	5.2	89	2
	5.6	5.8	100	
	6	6.3	107	
	6.2	6.4	110	
7	7.3	125	3	
8	8.3	143		
Externe Enthärtungsanlage möglicherweise erfordern (Werte von 150-535)	8.4	8.8	150	3
	9	9.4	161	
	10	10.4	178	
	10.1	10.5	180	
	11	11.5	196	4
	11.2	11.7	200	
	11.8	12.3	210	
	12	12.5	214	
	13	13.6	232	5
	14	14.6	250*	
	15	15.6	268	6
	16	16.7	286	
	16.8	17.5	300	
	17	17.7	303	
	18	18.8	321	7
	19	19.8	339	
	19.6	20.5	350	
	20	20.9	357	
	20.2	21.0	360	8
	21	21.9	375	
22	22.9	393		
22.4	23.4	400		
23	24.0	411	8	
24	25.0	428		
25	26.1	446		
25.2	26.3	450		
26	27.1	464		
27	28.2	482		
28	29.2	500		
28.6	29.8	510		
29	30.2	518		
30	31.3	535	8	
Externe Enthärtungsanlage zwingend erforderlich (Werte >535)	>30.3	>31.6		>540

\*Beachten Sie bitte: Der Wasserteststreifen ist nur bis zu 250 ppm genau. Falls die Ablesung am Teststreifen über 250 ppm liegt und/oder wenn der Standort für die Installation des HYDR/M bekanntermaßen Probleme mit der Wasserqualität hat, wird dringend empfohlen, einen ausführlicheren und exakteren Wassertest von einem Labor durchführen zu lassen.

# 3. Inbetriebnahme Ihres HYDRIM








## 3.5 Entsorgung von Verpackung und Altgeräten

Ihr Gerät wird in einem Pappkarton versandt. Bitte zerkleinern Sie diesen und recyceln oder entsorgen Sie ihn gemäß den kommunalen Vorschriften.






Ein außer Betrieb genommenes Gerät sollte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Dies wäre möglicherweise gesundheitsschädlich und umweltgefährdend. Das Gerät wurde im Medizinbereich eingesetzt und stellt daher möglicherweise ein Infektionsrisiko dar. Zudem enthält das Gerät verschiedene recycelbare Stoffe, die daraus gewonnen und für die Herstellung anderer Produkte wiederverwendet werden können. Erfragen Sie bei Ihrer Kommune die Vorgaben für die Entsorgung elektronischer Geräte.

## 3.6 Sprache einstellen






Die Meldungen Ihres HYDRIM können in vielen verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Mit folgenden Schritten ändern Sie die aktuelle Sprache:

-  1.  →  → 
2. Blättern Sie zur  und wählen aus.
3. Im Dialog SPRACHE drücken Sie  , um durch die Sprachliste zu blättern. Wenn Sie die gewünschte Sprache gefunden haben, drücken Sie , um die Auswahl zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren.

## 3.7 Land einstellen









-  1.  →  → 
2. Blättern Sie zu  und wählen aus.
3. Geben Sie den Landesnamen per Tastatur ein und drücken zur Auswahl  . Drücken Sie , um dies zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren.

## 3.8 Uhrzeit einstellen

-  1.  →  → 
2. Blättern Sie zu  und wählen Zeit.
3. Im Dialog ZEIT stellen Sie die Zeit per Tastatur ein. Drücken Sie  zum Speichern und , um zum Set-up-Menü zurückzukehren.





### 3. Inbetriebnahme Ihres HYDR/M

**HINWEIS:** Wenn der HYDR/M mit einem Netzwerk verbunden ist, muss auch die richtige Zeitzone eingestellt werden. Öffnen Sie das Untermenü Zeit, wählen Zeitzone und blättern zur Auswahl Ihrer Zeitzone.

4. Um die Anzeige Ihres Gerätes auf das 12-Stunden-Format zu ändern (das 24-Stunden-Format ist die Standardeinstellung), öffnen Sie das Set-up-Menü und blättern mit   zu 12h/24h und wählen dort 12 aus. Drücken Sie , um Ihre Einstellungen zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren.
5. Zum Aktivieren der Sommerzeitumstellung öffnen Sie das Set-up-Menü und blättern mit   zu SZ einst und wählen aus. Mit   schalten Sie SZ an oder SZ aus und drücken Sie , um Ihre Einstellungen zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren.


#### 3.9 Datum einstellen



2. Blättern Sie zu  Zeit und wählen Datum aus.
3. Im Dialog DATUM stellen Sie das Datum per Tastatur ein. Drücken Sie  zum Speichern und , um in das Set-up-Menü zurückzukehren.
4. Zum Ändern des gezeigten Datumsformats öffnen Sie das Set-up-Menü und blättern Sie mit   zu DATUMSFORM EINST. Bestätigen Sie Ihre Eingabe, um das Datum im gewünschten Format anzuzeigen. Drücken Sie , um dies zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren.

#### 3.10 Gerätekenung zuordnen



2. Blättern Sie zu  und wählen das aus.
3. Über das Bedienfeld können Sie eine Gerätekennummer mit maximal 3 Ziffern festlegen. Drücken Sie  zum Speichern und , um in das Set-up-Menü zurückzukehren.

#### 3.11 Trocknungszähler zurücksetzen

Der Trocknungszähler muss beim Austausch des HEPA-Filters zurückgesetzt werden. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:




2. Blättern Sie zu  Blättern Sie zu.
3. Zum Zurücksetzen wählen Sie Standard 0.

## 3. Inbetriebnahme Ihres HYDR/M





### 3.12 Innenreinigungszähler zurücksetzen

Je nach Ausführung verfügt das Gerät über das Innenreinigungssystem LCS, bei dem der Zähler für die Innenreinigung zurückgestellt werden muss, wenn das System verwendet und der biologische Filter gewechselt wird. Der Zähler für die Innenreinigung kann wie folgt zurück gesetzt werden:





1. 
2. Blättern Sie zu **LCS-Zähler zurücksetzen** und wählen das aus.
3. Zum Zurücksetzen wählen Sie Standard 0.

### 3.13 Bildschirmschonerverzögerung einstellen

Die Dauer bis zur Aktivierung des Bildschirmschoners stellen Sie mit folgenden Schritten ein:

1. 
2. Blättern Sie zu **Bildschirmschoner** und wählen es aus.
3. Blättern Sie mit   durch die Zeitoptionen. Wenn Sie die geforderte Zeit gefunden haben, drücken Sie darauf. Drücken Sie , um das zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren.

### 3.14 Temperaturanzeige einstellen





1. 
2. Blättern Sie zu **Temperatur C/F** und wählen das aus.
3. Mit   wählen Sie zwischen der Anzeige in Grad Celsius oder Fahrenheit aus. Drücken Sie , um das zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren.

### 3.15 Tastenton EIN oder AUS schalten

In der Voreinstellung quittiert der HYDR/M jeden Tastendruck akustisch. Mit folgenden Schritten können Sie den Ton ausschalten:







**HINWEIS:** Das AUS schalten des Tastentons schaltet andere Alarmsignale und Hinweistöne zu Zyklen nicht aus.

1. 
2. Blättern Sie zu **Tastenton einstellen** und wählen das aus.
3. Mit   blättern Sie durch die Optionen für EIN und AUS und wählen sie aus. Drücken Sie , um dies zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren.

## 3. Inbetriebnahme Ihres HYDR/M





### 3.16 Signaltonlautstärke einstellen

Zum Einstellen der Signaltonlautstärke verwenden Sie folgende Schritte:

1. 
2. Blättern Sie zu  und wählen das aus.
3. Blättern Sie mit   durch die Einstellungen der Lautstärke. Wählen Sie eine aus und drücken darauf. Drücken Sie , um dies zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren.





### 3.17 Wasserenthärter einstellen

Der Wasserenthärter sollte entsprechend ihrer örtlichen Wasserhärte eingestellt werden. Zur Bestimmung der richtigen Einstellung sehen Sie im Kapitel 3.4 Wasserqualität testen nach. Mit folgenden Schritten stellen Sie den Wasserenthärter ein:

1. 
2. Blättern Sie zu  und wählen das aus.
3. Mit   ändern Sie den Wert. Die Standardeinstellung ist 1. Drücken Sie , um dies zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren.





### 3.18 Bildschirmkontrast einstellen

Der Touchscreen ist auf die Lichtverhältnisse der meisten Aufbereitungsräume eingestellt. Wenn Sie den Kontrast für Ihre Praxis anpassen müssen, befolgen Sie diese Schritte:

1. 
2. Blättern Sie zu  und wählen das aus.
3. Blättern Sie mit   durch die Kontrastoptionen. Wenn Sie den passenden Wert gefunden haben, wählen Sie diesen aus. Drücken Sie , um Ihre Eingaben zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren.

### 3.19 Themen der Touchscreen-Anzeige ändern

Die Themen des Touchscreens (d. h. Symbole und Hintergrundfarben) lassen sich auf eine der vorgegebenen Optionen ändern. Mit folgenden Schritten ändern Sie die Themen:

1. 
2. Blättern Sie zu  und wählen das aus.
3. Im Dialog  blättern Sie mit   durch die verfügbaren Optionen. Beim Blättern wird jedes Thema auf dem Touchscreen angezeigt. Drücken Sie , um Ihre Thema auszuwählen und zum Set-up-Menü zurückzukehren.

# 3. Inbetriebnahme Ihres HYDR/M

## 3.20 Benutzername anlegen

Sie können bis zu vier eindeutige Benutzernamen anlegen. Mit folgenden Schritten ordnen Sie einen Benutzernamen zu:



2. Blättern Sie zu **Benutzer** und wählen das aus.

3. Zum Zuordnen eines Benutzernamens wählen Sie **Benutzername**, geben einen Namen (bis zu 12 Zeichen) per Tastatur ein und drücken **EN** zum Speichern.




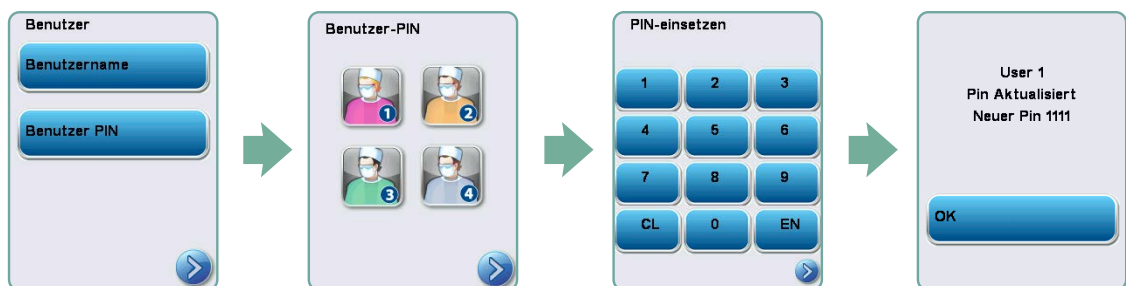
## 3.21 Benutzer-PIN festlegen

Im Dialog Benutzer-PIN können Sie bis zu vier PINs zuordnen. Mit folgenden Schritten ordnen Sie eine PIN zu:



2. Blättern Sie zu **Benutzer** und wählen das aus.

3. Zum Zuordnen einer Benutzer-PIN wählen Sie **Benutzer-PIN** und geben eine Zahl (bis zu 4 Ziffern) per Tastatur ein, drücken **EN** zum Speichern und , um zum Bestätigungsdialog zu gelangen.







4. Wenn alle im Bestätigungsdialog gezeigten Informationen richtig sind, drücken Sie OK und gelangen zurück zum Dialog Benutzer-PIN. Zur Korrektur wählen Sie die zu ändernde Benutzer-PIN aus und wiederholen den beschriebenen Ablauf.



# 3. Inbetriebnahme Ihres HYDR/M

## 3.22 Passwortfreigabe einrichten

Wenn die Passwortfreigabe aktiviert ist, müssen Benutzer am Ende eines Zyklus eine PIN eingeben. Damit die Passwortfreigabe funktioniert, müssen zuvor Benutzer-IDs und PINs zugeordnet sein. Zum Einrichten der Benutzer-IDs und PINs sehen Sie in den Kapiteln 3.20 und 3.21 nach. Mit folgenden Schritten aktivieren Sie die Passwortfreigabe:

1. 
2. Blättern Sie zu Passwortgeschützter Vorgang und wählen Sie es aus.
3. Mit   schalten Sie die Funktion der Passwortfreigabe EIN und AUS. Drücken Sie , um die Auswahl zu speichern und zum Set-up-Menü zurückzukehren



**HINWEIS:** Jeder Benutzer kann einen Zyklus anhalten, auch wenn die Passwortfreigabe aktiviert ist. Die Zyklusdaten protokollieren jedoch, dass ein unbefugter Benutzer den Ablauf gestoppt hat.



## 3.23 LAN-Verbindung herstellen


Der HYDR/M C61wd G4 hat einen 10/100Base-T-Ethernet-Anschluss auf der Rückseite. Um den HYDR/M mit einem Router an ein Netzwerk anzuschließen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Ethernet-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes. Wenn Ihre Praxis einen Router verwendet, sollte der Router dem Gerät automatisch eine IP-Adresse zuweisen. Ein rotes X am Netzwerksymbol bedeutet, dass das Gerät nicht verbunden ist. Ein gelbes Häkchen bedeutet, dass das Gerät eine IP-Adresse hat, aber nicht mit dem Internet verbunden ist und keine E-Mails senden kann. Ein grünes Häkchen zeigt an, dass die Internetverbindung richtig eingerichtet ist und das Gerät E-Mails versenden kann.



**HINWEIS:** Wenn Sie in bestimmten Fällen keinen Router haben und beispielsweise eine Windows Netzwerkgfreigabe nutzen, müssen Sie eventuell eine dedizierte oder „statische“ IP-Adresse zuordnen. Wenden Sie sich dafür an Ihren Netzwerkadministrator.

2. Drücken Sie im Hauptbildschirm das Symbol Netzwerk. Der Dialog Netzwerk zeigt Informationen über die Konnektivität Ihres HYDR/M sowie ihre IP-Adresse an.

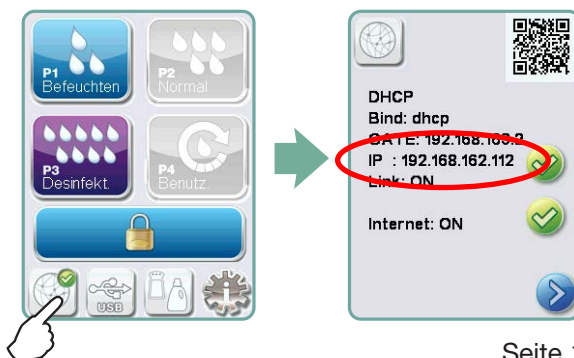


### 3. Inbetriebnahme Ihres HYDRIM

3. Geben Sie die am Touchscreen gezeigte IP-Adresse in den Browser eines internetfähigen Gerätes ein, um auf das Web-Portal Ihres Gerätes zuzugreifen. Wenn das Netzwerksymbol aktiv ist (zum Beispiel eine E-Mail versendet wird), wird es grün.

**HINWEIS:** Verwenden Sie den QR-Code zur Verbindung mit einem Mobilgerät.

**HINWEIS:** Die Verbindungszeit hängt von Ihrer Netzwerkgeschwindigkeit ab, und das Herstellen der ersten Verbindung kann länger dauern.

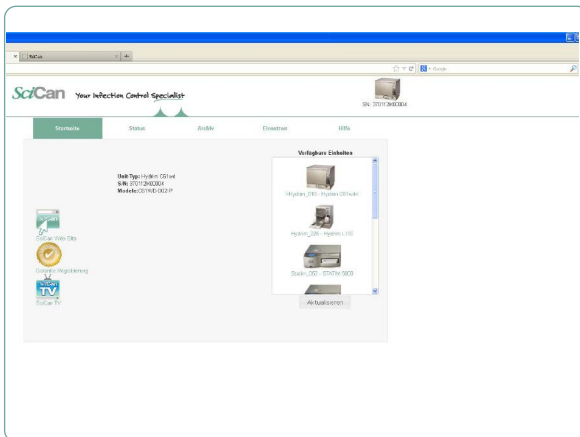

#### 3.24 WLAN-Verbindung herstellen

HYDRIM Modelle haben eine Drahtlosfunktion, um Geräte mit dem G4-Netzwerk zu verbinden. Dies bringt weitere Flexibilität für den Netzwerkkabelanschluss, der ebenfalls für HYDRIM C61wd G4-Geräte verfügbar ist. HYDRIM C61wd G4 WiFi ermöglicht die einfache Einrichtung und sorgt für eine sichere Verbindung mit dem G4-Netzwerk.

1. Drücken Sie das Netzwerksymbol auf dem Hauptbildschirm.
2. WLAN und Ihr Netzwerk auswählen, danach Passwort eingeben.

**HINWEIS:** Sie können Ihre Verbindungseinstellungen jederzeit ändern.

## 4. Verwendung Ihres HYDR/IM

### 4.1 Empfehlungen zur Aufbereitung von Instrumenten

Der HYDR/IM C61wd G4 ist für die Reinigung oder Reinigung und thermische Desinfektion (je nach gewähltem Zyklus) allgemeiner zahnmedizinischer und medizinischer Instrumente konzipiert. Das Desinfektionsniveau ( $A_0=3000$  oder höher) ist die Darstellung der Verringerung der Anzahl lebensfähiger Mikroorganismen auf einem Gegenstand, auf ein für dessen beabsichtigte weitere Handhabung oder Nutzung angemessenes Niveau, gemäß den Anforderungen regionaler oder nationaler Behörden. Aufsichtsbehörden können in ihren Verantwortungsgebieten jedoch strengere Anforderungen stellen..

**Für nichtinvasive Medizinprodukte empfiehlt SciCan nach der Aufbereitung im HYDR/IM eine abschließende Sterilisation, die entsprechenden regionalen Richtlinien sind zu beachten.**

**Für invasive Medizinprodukte wie zahnmedizinische Handstücke muss nach der Aufbereitung im HYDR/IM C61wd G4 eine abschließende Sterilisation durchgeführt werden.**

**HINWEIS: Bevor Sie Instrumente in den HYDR/IM legen und die optionale Aufnahme für Handstücke nutzen, sehen Sie in den Anweisungen des Instrumentenherstellers für die Aufbereitung nach, ob diese für die Reinigung in einem Thermodesinfektor geeignet sind. Im Zweifelsfall konsultieren Sie den Hersteller der Instrumente.**

Beispiele für medizinische und zahnmedizinische Instrumente die im HYDR/IM gereinigt und desinfiziert werden können sind:

- Scaler, Spatel und Hämostatens aus Edelstahl.
- Edelstahl-Retraktoren, Nadelhalter, Hauthaken, Gewebefasszangen, Scheren, Küretten und andere Edelstahlinstrumente ohne tiefe Aussparungen.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen sollten die im HYDR/IM aufbereiteten Instrumente folgende Eigenschaften aufweisen:

- Hitzebeständigkeit bei Temperaturen von bis zu 95°C.
- Korrosionsbeständigkeit auch bei hohen Temperaturen.

!

Mikrokeratome, Phako-Tubing, Faseroptiken und elektrische Ausrüstung sollten nicht im HYDR/IM aufbereitet werden.

!

Nickelbeschichtete Instrumente beziehungsweise Instrumente die Aluminium oder farbeloxiertes Aluminium enthalten, sowie Einweginstrumente, sind nicht für die Aufbereitung im HYDR/IM nicht geeignet.

Die HIP™ Ultra Reinigungslösung (HYDR/IM Reinigungslösung mit Instrumentenschutz) wurde sorgfältig entwickelt, um eine herausragende Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Metallen und Beschichtungen zu gewährleisten. Die Instrumente bestimmter Hersteller können dennoch Material-Unverträglichkeiten aufweisen.

## 4. Verwendung Ihres HYDR/M

Manche Instrumentenhersteller nutzen spezielle Beschichtungen, die eventuell nicht für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten geeignet sind. Wenden Sie sich bezüglich Empfehlungen für die Reinigung dieser Instrumente an den jeweiligen Hersteller der Instrumente.



Allgemein ist nicht zu empfehlen, verchromte Instrumente und solche aus Kohlenstoffstahl im HYDR/M C61wd G4 aufzubereiten.



Für die Aufbereitung kleiner oder leichter Gegenstände im HYDR/M C61wd G4 verwenden Sie den Korb mit Deckel.



Legen Sie keine Dentalbohrer in den HYDR/M C61wd G4.

# 4. Verwendung Ihres HYDRIM

## 4.2 Programm-Übersicht

### HYDRIM C61wd G4 Reinigungs- und Desinfektionsgerät für Instrumente

Zyklus	Vorwaschgang	Waschgang	Spülen	Trocknen
<b>P0 – Zyklus Maschinenreinigung</b> Keine anfängliche Entleerung.	<30°C (kalt) 2-10 Minuten (standardmäßig 2 Minuten)	N/A	<30°C (kalt) 2 Minuten	N/A
<b>P1 – Zyklus Befeuchten</b> (nur Reinigung, keine Desinfektion) - Verhindert, dass Schmutz auf den Instrumenten antrocknet, wenn diese nicht innerhalb einer Stunde nach ihrer Verwendung gewaschen werden. Beachten Sie bitte, dass dieser Zyklus keine Desinfektion ausführt, da er lediglich als Vorwaschgang für Instrumente vorgesehen ist.	<30°C (kalt) 2-10 Minuten (standardmäßig 2 Minuten)	N/A	30°C 1 Minute	N/A
<b>P2 -Zyklus Normal*</b> (nur Reinigung, keine Desinfektion) - für mäßig verschmutzte lose Instrumente. Beachten Sie bitte, dass dieser Zyklus KEINE Desinfektion darstellt, was in manchen Regionen nicht akzeptabel ist. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie vor der Aktivierung diesbezüglich bei Ihren örtlichen Regulierungsbehörden nachfragen.	<30°C (kalt) 2 Minuten	50°C 5 Minuten	60°C 1 Minute	1-25 Minuten (standard- mäßig 10 Minuten)
<b>P3 – Zyklus Intensiv</b> (Reinigung mit Desinfektion) - Für stark verschmutzte Instrumente und Kassetten.	<30°C (kalt) 2-10 Minuten (standardmäßig 2 Minuten)	50°C 9-15 Minuten	90-95 °C 5 Minuten	1-25 Minuten (standard- mäßig 8 Minuten)
<b>P4 - Benutzerdefiniert*</b> (A <sub>0</sub> zwischen A <sub>0</sub> = 3,500 (Spülen) und A <sub>0</sub> = 6,000)	<30°C (kalt) 2 Minuten	50°C 5-9 Minuten	90-95 °C 1-5 Minuten	1-25 Minuten (standard- mäßig 8 Minuten)
<b>P5 – Special Cycle</b> 93°C, 10 Minuten Zugang nur für Techniker. Dieser Zyklus hat ein anderes Profil, es wird bis nach der Desinfektion nicht abgepumpt; die Desinfektion erfolgt während der Reinigung.	N/A	90-95°C 10 Minuten	70°C 5 Minuten	1-25 Minuten (standard- mäßig 8 Minuten)

\* Von einem Techniker zu aktivieren.

Die Desinfektionstemperaturen bei P3, P4 und P5 sind die jederzeit während der Desinfektion überall in der Waschkammer garantierten Mindesttemperaturen. Die Desinfektionstemperatur ist jedoch auf rund 93°C eingestellt mit einem oberen Schaltpunkt des Heizers bei 94°C und einem unteren Schaltpunkt bei 92°C.

Die Desinfektionszeit kann bei P4 in Schritten von einer Minute um 1 bis 5 Minuten erhöht werden. Die minimale Desinfektionszeit beträgt 1 Minute mit einem minimalen A<sub>0</sub>-Wert von 3500. Der minimale A<sub>0</sub>-Wert bei der Desinfektionsdauer von 5 Minuten beträgt 6000. Die abschließende Spüldauer muss nach der Installation in der Praxis von einem Techniker eingestellt und geprüft werden.

**HINWEIS:** ISO 15883-1 beschreibt die Zeit-Temperatur-Beziehungen für thermische Desinfektion wie folgt:

*"Bei einem Desinfektionsprozess mit feuchter Hitze kann erwartet werden, dass eine bestimmte Temperatur über eine bestimmte Dauer zu einer voraussagbaren Abtötung bei einer standardisierten Population von Organismen führt." "Die Festlegung der meisten Desinfektionsprozesse mit feuchter Hitze darf mittels des A<sub>0</sub>-Verfahrens erfolgen; hier werden die Kenntnisse über die Letalität durch die jeweiligen Prozesse bei unterschiedlichen Temperaturen angewendet, um die Gesamtabtötung des Prozesses zu bewerten und dies als äquivalente Expositionszeit bei einer festgelegten Temperatur anzugeben."*


# 4. Verwendung Ihres HYDRIM

## 4.3 Körbe und Zubehör



Beachten Sie die Empfehlungen des Instrumentenherstellers bezüglich Reinigung und Pflege. Beim Bestücken des Gerätes arrangieren Sie lose Instrumente so, dass diese sich gegenseitig nicht berühren. Instrumente mit konkaven Oberflächen oder Vertiefungen sollten so platziert werden, dass das Wasser frei ablaufen kann.

### Körbe

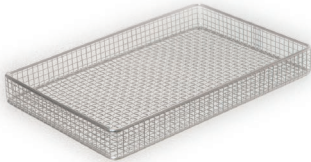

Korb STATIM 2000  
01-107240



Korb STATIM 5000  
01-107241



Großer Korb  
01-113545



Hygienekorb  
01-113546



Korb mit Klappdeckel  
01-113547

### Aufnahme für Handstücke

Nur bei Modellen die über das Innenreinigungssystem LCS verfügen.



Aufnahme für Handstücke  
01-113625

### Racks (Rollwagen und Körbe nicht enthalten)



Racks für sechs Kassetten  
01-113251



Racks für drei Kassetten und zwei Körbe  
01-113253




Racks für zwei Körbe  
01-113257

### Racks für vertikale und klappbare Instrumente

Verwendung eines zusätzlichen Korbes erforderlich



Racks für vertikale Instrumente  
01-113255

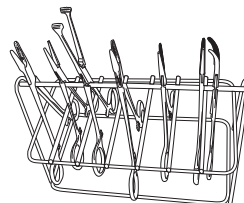

Racks für klappbare Instrumente  
01-110409S



Rack für zehn Trays und zwei Körbe  
01-113254

## 4. Verwendung Ihres HYDRIM

### 4.4 Hinweise und Tipps für optimale Reinigungsergebnisse

- Entfernen Sie Zement, Verbundwerkstoffe und Amalgam bereits am Zahnarztstuhl von den Instrumenten, bevor Sie diese im HYDRIM aufbereiten.
- Verwenden Sie nur für den HYDRIM C61wd G4 vorgesehenes Zubehör wie Körbe, Kassetten, Einschübe und Aufnahmen zum Platzieren der Instrumente.
- Verwenden Sie Zubehör nur für den vorgesehenen Zweck. Legen Sie beispielsweise keine klappbaren Instrumente in Kassetten, sondern nutzen Sie stattdessen den entsprechenden Korb dafür.
- Zerlegen Sie Instrumente, sofern das möglich ist.
- Achten Sie darauf dass die Instrumente nicht übereinander liegen. Jedes Instrument muss separat platziert werden.
- Alle Instrumente müssen so im Reinigungs- und Desinfektionsgerät angeordnet werden, dass ein guter Ablauf von allen Oberflächen gewährleistet ist. Flächen an die kein Wasser und kein Reinigungsmittel gelangt, können nicht gereinigt werden.
- Klappbare Instrumente sollten in weit geöffneter Stellung in Körbe gelegt werden. Geschlossene klappbare Instrumente können nicht gereinigt werden.
- Stellen Sie Absaugkanülen in den Korb für vertikale Instrumente und stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert in und aus den Kanülen fließen kann. Legen Sie Absaugkanülen nicht waagrecht in einen Korb oder eine Kassette. Bei Hohlkörper-Instrumenten wie zahnärztlichen Handstücken werden nur die Außenflächen gereinigt (solange Sie nicht den LCS-Adapter verwenden).
- Platzieren Sie Schalen und andere konkav geformte Teile in solchem Winkel, dass das Wasser leicht von den Oberflächen ablaufen kann.
- Überladen Sie den HYDRIM nicht.
- Überprüfen Sie die Einstellungen des HYDRIM:
  - Stellen Sie sicher, dass die Wascharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.
  - Stellen Sie sicher, dass die Siebfilter im Ablauf der Kammer frei von Fremdkörpern sind.
- Für optimale Reinigungsergebnisse sollten die Instrumente so rasch wie möglich im HYDRIM aufbereitet werden. Falls eine sofortige Reinigung nicht möglich ist, sollten Sie die Instrumente sofort nach dem Einsatz am Patienten mit dem Programm P1 Befeuchten bearbeiten.
- Kontrollieren Sie die Instrumente nach der Reinigung visuell auf Sauberkeit und Unversehrtheit (Korrosion, Materialveränderungen) und reparieren oder ersetzen Sie die Instrumente bei Bedarf.
- Wenn die Passwortfreigabe aktiviert ist, muss der Bediener nach dem Abschluss eines vollständigen Zyklus bestätigen, dass die Instrumente gemäß seiner visuellen Prüfung sauber sind.

## 4. Verwendung Ihres HYDR/M

### 4.5 Empfohlene Beladung

Der HYDR/M C61wd G4 kann viele verschiedene Kombinationen von Instrumenten aufbereiten, je nach:

- Größe der Praxis
- Arten vorgenommener Behandlungen
- Spezialisierung der Praxis
- Protokolle des Instrumentenmanagements


Nachfolgend ein paar Beispiele möglicher Beladungsvarianten, wie der gängigsten Bestückung der Körbe, der empfohlenen Anordnung allgemeiner Instrumente und ein Beispiel wie das Gerät nicht beladen werden sollte. Seien Sie sorgsam bei dem Umgang mit Instrumenten, Stich- oder andere Verletzungen zu vermeiden und beachten Sie die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen.

### Nutzung von Körben und Zubehör

Beachten Sie die Empfehlungen der Instrumentenhersteller bezüglich Reinigung und Pflege. Achten Sie beim Beladen des Gerätes darauf dass sich lose Instrumente nicht berühren. Instrumente mit konkaven Oberflächen oder Vertiefungen sind so anzuordnen, dass das Wasser frei ablaufen kann.


Beldadungsbeispiel:

#### Starre gerade und klappbare Instrumente

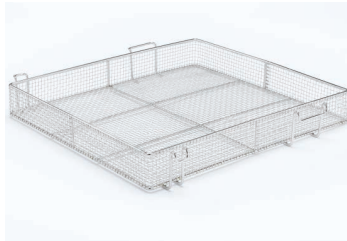

Zum Beispiel:  
Skalpelle,  
Scheren, Küretten,  
Exkavatoren, Stopfer  
usw.

#### Starre gerade Instrumente

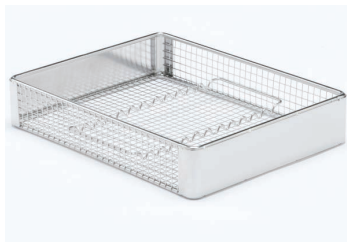


Zum Beispiel:  
Zangen, Messer,  
Sonden, Scaler usw.




## 4. Verwendung Ihres HYDRIM

### Klappbare Instrumente, starre Instrumente und Instrumente mit offenen Mulden

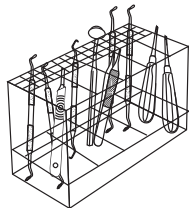


Zum Beispiel:  
Scaler, Küretten,  
Wurzelheber,  
einteilige Spiegel,  
Absaugkanülen usw.

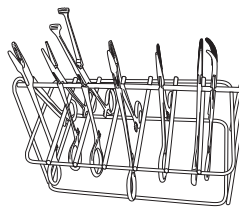




Zum Beispiel:  
Gewebebinzetten  
und Scheren.

### Kleine und zerlegte Instrumente

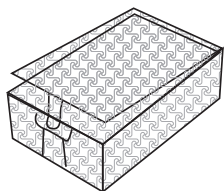

Zum Beispiel: zweiteilige Spiegel, Skalpell-Handgriffe usw.

### Instrumentensätze in Kassetten – volle Bestückung

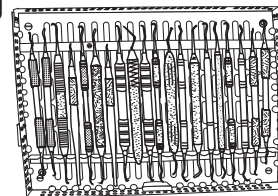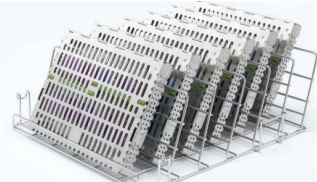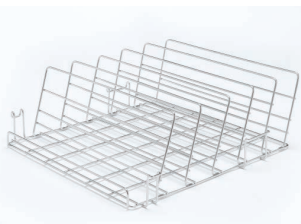

Zum Beispiel: Knochenfeilen, Stopfer, Küretten, Exkavatoren usw.

### Handstücke



Nur bei Modellen die über das Innenreinigungssystem LCS verfügen.

# 4. Verwendung Ihres HYDR/M

## 4.6 Einen Zyklus ausführen

Vor der Verwendung Ihres HYDR/M prüfen Sie, dass die Wasserzufuhr offen und die HIP™ Ultra Reinigungslösung richtig eingesetzt und befestigt ist und führen Sie dann folgende Schritte aus:

- 1** Schalten Sie das Gerät ein.



- 2** Tippen Sie zum Starten auf den Bildschirm.



- 3** Drücken Sie bei Bedarf auf **ENTSPERREN**.



- 4** Legen Sie die Instrumente in die Körbe oder Kassetten, laden Sie diese in die Maschine und schließen Sie die Tür.




- 5** Wählen Sie den gewünschten Zyklus. (Verwenden Sie für Kassetten, klappbare Instrumente sowie stark verschmutzte Instrumente den Zyklus Intensiv.)



- 6** Drücken Sie auf **START**.




- 7** Der Zyklus beginnt.

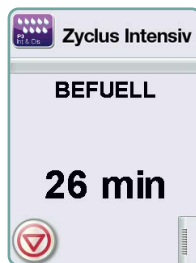

Der Zyklus beginnt mit einem Abpumpen des Gerätes. Der Balken auf dem Bildschirm zeigt den Fortschritt an. Unter dem Balken wird der Schritt im Ablauf angezeigt (z.B. Füllen, Spülen). Stets wird die voraussichtliche Restdauer (in Minuten) angezeigt. Beachten Sie bitte, dass sich die Dauer je nach prognostiziertem Zyklusende verkürzen oder verlängern kann.


- 8** Der Zyklus wurde beendet.

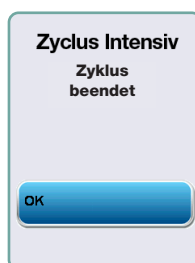

Nach Abschluss des Zyklus wird der Programmname und „Zyklus beendet“ angezeigt und das Gerät piept dreimal. Zum Öffnen der Tür drücken Sie auf „OK“. Entnehmen Sie die Instrumente mit Handschuhen. Seien Sie vorsichtig, da die Instrumente, Einschübe, Körbe und Kassetten heiß sein können. Kontrollieren Sie die Instrumente auf mögliche Rückstände, bevor Sie diese verpacken / sterilisieren.

## 4. Verwendung Ihres HYDRIM

### 4.7 Einen Zyklus unterbrechen / abbrechen

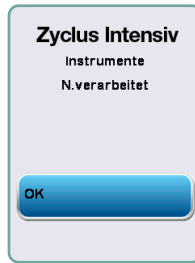

Die Tür Ihres HYDRIM ist während des Zyklus verriegelt. Wenn die Taste STOP gedrückt wird, wird der Zyklus abgebrochen und kann nicht fortgesetzt werden. Die Meldung „Abpumpen. Bitte warten“ erscheint. Das Gerät wird entleert. Dann erscheint die Meldung „Instrumente nicht verarbeitet“. Drücken Sie auf OK. Öffnen Sie die Tür durch Drücken auf . Fassen Sie die Instrumente mit Handschuhen an. Seien Sie vorsichtig, da Instrumente, Einschübe, Körbe und Kassetten heiß sein können. Um sicher zustellen dass die Instrumente ordnungsgemäß aufbereitet sind, wiederholen Sie den Zyklus.

**HINWEIS:** Falls die Trocknungsphase im Zyklus unterbrochen wird, sind die wichtigen Schritte im Zyklus abgeschlossen und die Meldung zeigt den Programmname, sowie die Meldung „Zyklus beendet, Trocknung unterbrochen“ an.



### 4.8 Zusätzliche Funktionen des Benutzer- und Set-up-Menüs

Mit folgenden Schritten öffnen Sie das Benutzer- oder Set-up-Menü:



#### Kammerreinigung

Dieser Zyklus dient zur regelmäßigen Entfernung von Ablagerungen harten Wassers von den Kammerwänden und Racks. Geben Sie vor dem Start des Zyklus 0,5 Liter Essig oder Zitronensäure in die Kammer. Der HYDRIM erinnert Sie nach je 25 Zyklen an einen Reinigungszyklus. Die Häufigkeit der Erinnerungen kann durch einen Techniker eingestellt werden. Tippen Sie auf „Reinigung“. Es erfolgt ein Reinigungszyklus ähnlich zum normalen Reinigungsablauf. Eine unterlassene Kammerreinigung kann Korrosion begünstigen.

## 4. Verwendung Ihres HYDRIM



### Zykluszähler

Hier kann der Anwender sehen, wie viele Zyklen der HYDRIM bereits absolviert hat. Tippen Sie auf Zykluszähler, so dass die Anzahl der Zyklen (vollständige und abgebrochene) angezeigt wird. Dieser Zähler kann nicht zurückgesetzt werden. Tippen Sie auf den Pfeil nach links, um zum vorigen Menü zurückzukehren.



### Anweisungen

Benutzer haben Zugriff auf eine Datenbank mit bebilderten Anleitungen zur Ausführung von Routinearbeiten wie dem Einsetzen der Reinigungslösung.

### Tür bei Stromausfall öffnen



Bei einem Stromausfall betätigen Sie den Hebel an der Türoberkante, schieben Sie diesen nach rechts und ziehen Sie die Tür auf. Vorsicht! Es kann noch Flüssigkeit im Gerät sein, und die Instrumente können heiß sein. Falls der Zyklus unterbrochen wurde, sollten die Instrumente nicht verwendet sondern nochmals aufbereitet werden.



## 5. Zyklusinformationen speichern und abrufen

Der HYDRIM C61wd G4 hat einen internen Datenlogger, der über die gesamte Nutzungsdauer des Gerätes alle Daten zu allen beendeten und unvollständigen Zyklen speichert. Sie können diese Informationen über den Touchscreen, die Webschnittstelle oder mit einem USB-Speichergerät abfragen.

### 5.1 Abruf von Zyklusinformationen über den Touchscreen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf das USB-Symbol.
2. Das Gerät speichert die letzten fünf erfolgreichen sowie die letzten fünf unvollständigen Zyklen auf.

Nachdem Sie einen Zyklus in der Liste ausgewählt haben, werden Informationen zum Zyklus in ähnlicher Form wie für einen Ausdruck angezeigt.



3. Blättern Sie zum Lesen mit den Pfeiltasten.



**HINWEIS:** Unabhängig vom Anschluss eines USB-Speichermediums an das Gerät können Sie stets die letzten fünf erfolgreichen und die letzten fünf unvollständigen Zyklen abfragen.

Nutzen Sie die Web-Schnittstelle des HYDRIM C61wd G4, um alle im HYDRIM gespeicherten Informationen von Ihrem Computer aus abzurufen. Um eine Verbindung mit Ihrem HYDRIM herzustellen lesen Sie in Kapitel 3.23 LAN-Verbindung herstellen nach.

# 5. Zyklusinformationen speichern und abrufen

## 5.2 Abruf von Zyklusinformationen aus der USB-Datensicherung

Das USB-Speichergerät kann die auf dem Gerät gespeicherten Zyklusinformationen zu einem Computer übertragen. Das sollte möglichst wöchentlich gemacht werden. Zur Datenübertragung per USB-Anschluss führen Sie folgende Schritte aus:


1. Verbinden Sie das USB-Speichermedium mit dem USB-Anschluss.
2. Der HYDR/M merkt sich, welche Daten bereits zum USB-Speichergerät übertragen worden sind und lädt nun automatisch nur neue Daten. Die Daten aus dem internen Speicher des HYDR/M können nur einmal kopiert werden. Der Zugriff auf zuvor bereits übertragene Informationen ist über die Web-Schnittstelle möglich.
3. Wenn das Kontrolllicht an Ihrem USB-Speichergerät aufhört zu blinken oder das USB-Symbol auf der LCD-Anzeige von einem blinkenden Grün zu konstantem Grau wechselt, entfernen Sie das USB-Speichergerät und übertragen die Daten auf Ihren Computer.



**HINWEIS:** Wenn Sie im Hauptmenü das Symbol USB-Speichergerät auswählen, können Sie nur die letzten fünf kompletten sowie die letzten fünf unvollständigen Zyklen ansehen. Um alle Zyklen vom USB-Speichergerät anzuzeigen, müssen Sie den Computer verwenden.

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr USB-Speichermedium verlieren und die Zyklusdaten Ihres Gerätes auf ein neues Medium kopieren wollen, führen Sie folgende Schritte aus:

4. Schließen Sie das neue USB-Speichermedium am USB-Anschluss an.
5. Wählen Sie das USB-Symbol aus.
6. Im Dialog Zyklusinformationen wählen Sie erneut das USB-Symbol aus.
7. Wählen Sie Kopieren, so dass das Gerät alle Zyklusdaten auf das USB-Speichermedium kopiert.

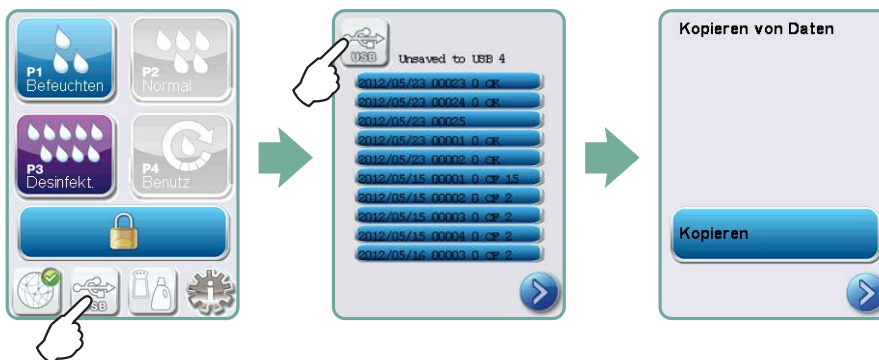

# 6. Pflege und Wartung

## 6.1 Austausch der HIP™ Ultra Reinigungslösung

Ersetzen Sie die Reinigungslösung nur durch die HIP™ Ultra Reinigungslösung, die in verdünnter Form als Mittel für die Reinigung chirurgischer Instrumente im HYDR/M Reinigungs- und Desinfektionsgerät verwendet wird.


Diese farblose und nahezu geruchlose Flüssigkeit ist vollständig in Wasser löslich. Beim Umgang mit dieser Chemikalie sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 3.2 Handhabung und Einsetzen der HIP™ Ultra Reinigungslösung.




**HINWEIS:** Um ein Verschütten zu vermeiden, tauschen Sie den Behälter mit der Lösung nur dann aus, wenn die Meldung erscheint. Tragen Sie dabei Handschuhe.

Wenn ein rotes X am Symbol für Wasserenthärter/Reinigungslösung erscheint, drücken Sie auf das Symbol und ermitteln, ob das Problem am Wasserenthärter oder dem Stand der Reinigungslösung liegt. Wenn die Reinigungslösung ausgetauscht werden muss, erscheint daneben ein rotes X.


Zum Austausch der Reinigungslösung führen Sie folgende Schritte aus:  
Ersatzteil#: CS-HIPC-U (8 x 750 ml), HIP™ Ultra Reinigungslösung.

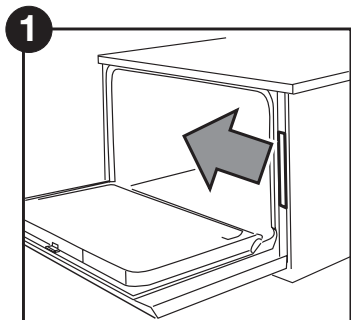

1  
Schalten Sie das Gerät AUS, öffnen die Tür und ziehen die Chemikalien-Schublade heraus.

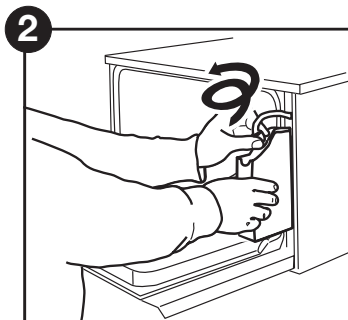


2  
Lösen Sie die Verbindung zur Reinigungslösung.

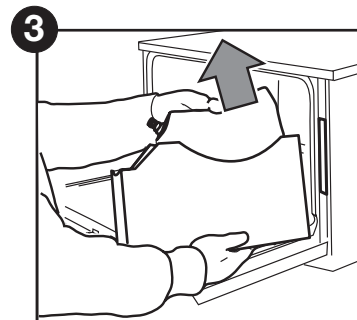


3  
Entfernen Sie den leeren Beutel der Reinigungslösung und entsorgen Sie diesen ordnungsgemäß.


## 6. Pflege und Wartung

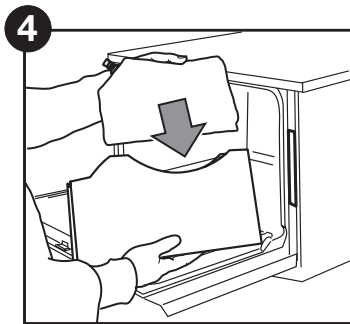

4  
Setzen Sie einen neuen Beutel in die Chemikalien-Schublade ein.

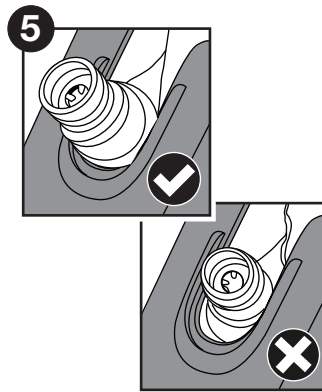


5  
Prüfen Sie die richtige Position der Tülle.

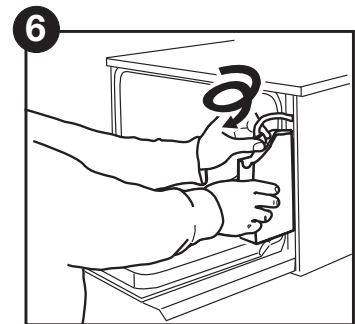

6  
Verbinden Sie den neuen Beutel, schließen die Tür und schalten Sie das Gerät EIN.

Zum Ansaugen der Dosierpumpe für die Reinigungslösung drücken Sie auf das Symbol Wasserenthärter/Reinigungslösung im Hauptmenü. Dann drücken Sie im Dialog Wasserenthärter/Reinigungslösung das rote X neben „Reinigungslösung“. Das Gerät saugt das Dosiersystem an und ein grünes Häkchen erscheint statt des roten X, sobald sie einsatzbereit ist.

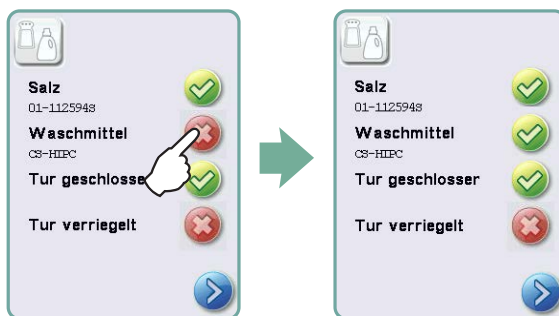


**HINWEIS:** Das System kann auch angesaugt werden, indem Sie einfach einen Zyklus starten und bei der Aufforderung „Reiniger gewechselt“ wählen.




# 6. Pflege und Wartung

## 6.2 Salzvorrat des Wasserenthärters nachfüllen

Wenn das rote X bei der Füllstandanzeige für Reinigungslösung und Wasserenthärter erscheint, drücken Sie auf das Symbol und ermitteln, ob das Problem am Stand des Wasserenthärters oder der Reinigungslösung liegt. Wenn der Wasserenthärter nachgefüllt werden muss, führen Sie folgende Schritte aus:

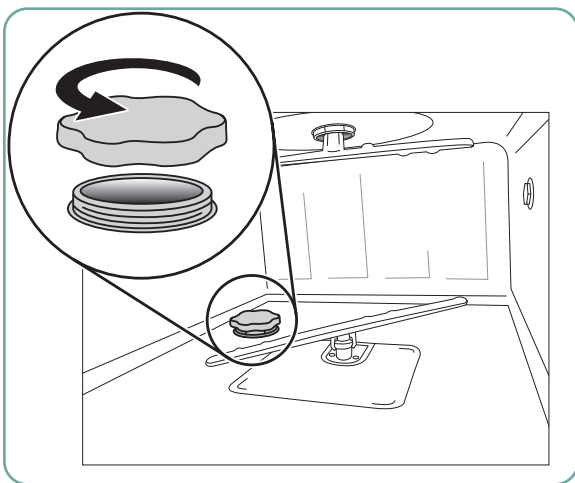

1. Öffnen Sie den Deckel des Salzbehälters.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit dem mitgelieferten Trichter komplett voll mit bis zu maximal 0,5 kg.
3. Schließen Sie den Deckel des Salzbehälters und prüfen Sie dass dieser fest geschlossen ist um Korrosion zu vermeiden. 
4. Führen Sie einen kompletten Zyklus ohne Instrumente aus.


Ersatzteil#: 01-112594S Salz,  
Wasserenthärter

## 6.3 Luftfilter und bakteriologischen Filter (sofern vorhanden) austauschen

### Luftfilter

Wenn die Meldung „Luftfilter austauschen“ erscheint, muss der HEPA-Filter gewechselt werden.

1. Schalten Sie den Strom ab.
2. Ziehen Sie das Lüftungsgitter unter der Fronttür des Gerätes auf.
3. Achten Sie auf die Pfeilrichtung und entfernen den alten Filter, indem Sie ihn von der Mitte aus ziehen.
4. Setzen Sie den neuen Luftfilter ein – bringen Sie den Pfeil in die richtige Position – und schließen das Lüftungsgitter.

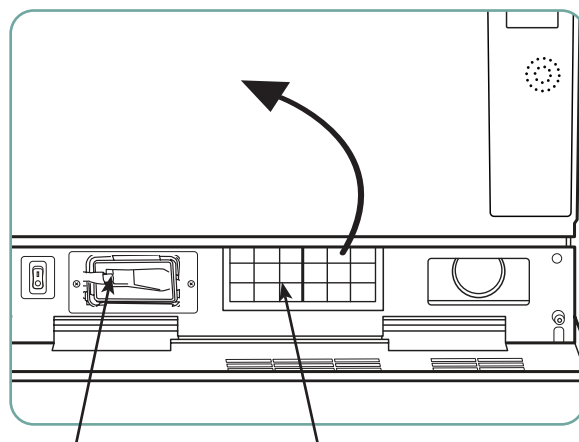

Bakteriologischer Filter HEPA-Filter

5. Nach dem Filterwechsel öffnen Sie den Dialog „Trocknungszähler reset“ im Set-up-Menü und setzen Sie den Trocknungszähler auf Null zurück. (Siehe Abschnitt 3.11)


Der Filter muss alle 750 Trocknungszyklen gewechselt werden. Das Gerät läuft auch ohne Filterwechsel weiter, aber die Trocknung wird dadurch verschlechtert.  
Ersatzteil#: 01-113277S Luftfilter, C61.

## 6. Pflege und Wartung


### Bakteriologischer Filter

Mit einem Innenreinigungssystem (LCS) ausgestattete Modelle verfügen über einen bakteriologischen Filter, der alle 500 Zyklen oder bei Verschmutzung ausgetauscht werden muss. Zum Austausch des bakteriologischen Filters führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schalten Sie das Gerät AUS, trennen Schlauch A vom bakteriologischen Filter und entnehmen den Filter aus der Filterhalterung.
2. Achten Sie vor der Entnahme auf Pfeilrichtung am Filter. Wenn der Filter aus der Halterung gelöst ist, lösen Sie vorsichtig Schlauch B von der Filterrückseite.
3. Vor dem Einbau des neuen bakteriologischen Filters (SciCan Bestellnr. 01-102119S) prüfen Sie, dass der Pfeil am Filter in dieselbe Richtung zeigt wie der Pfeil an der Halterung. Drücken Sie die rechte Filterfassung in Schlauch B.
4. Drücken Sie den neuen Filter vorsichtig in die Filterhalterung. Der Pfeil am Filter soll nach außen und nach rechts weisen.
5. Schließen Sie Schlauch A wieder links am Filter an.
6. Nach dem Wechsel des bakteriologischen Filters öffnen Sie den Dialog „LCS-Zähler zurücksetzen“ im Set-up-Menü und setzen Sie den Trocknungszähler auf Null zurück. (Siehe Abschnitt 3.12)

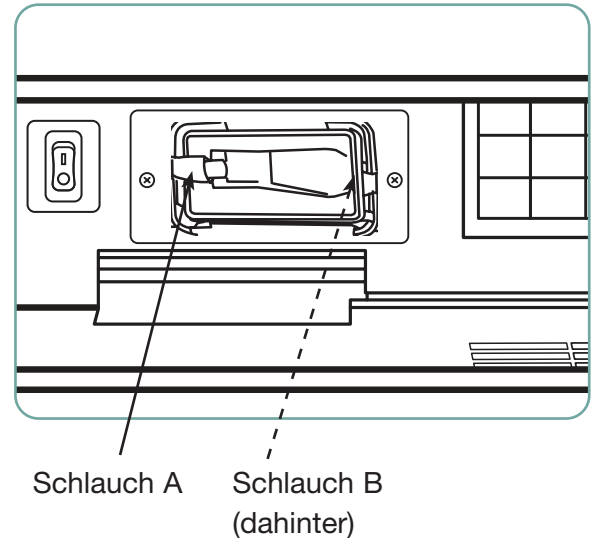


### 6.4 Wartung von Filter und Wascharm

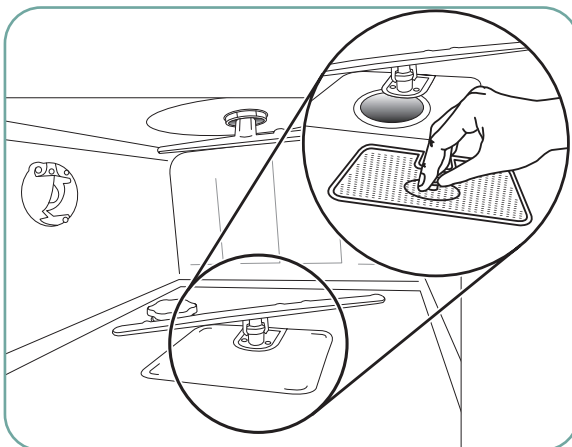

#### Filterwartung

Kontrollieren Sie täglich die Grob- und Feinfilter im Kammerboden auf Fremdkörper und reinigen Sie diese bei Bedarf. Zum Reinigen entfernen Sie den Filter (drehen Sie die Metallnut in der Mitte vorn am Filter und lösen sie), spülen Sie diesen unter fließendem Wasser ab und setzen Sie ihn wieder ein. Achten Sie darauf, dass der Filter wieder richtig befestigt ist.

## 6. Pflege und Wartung

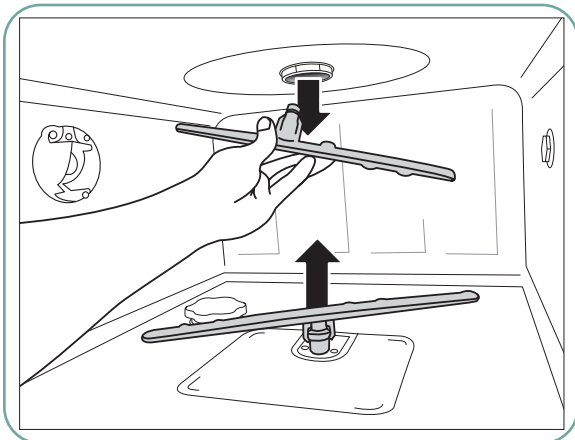

### Wartung des Wascharms:

Falls sich die Wascharme nicht leicht drehen lassen, entfernen Sie diese – ein zu häufiges Ausbauen der Wascharme kann allerdings deren Lebensdauer verringern. Die oberen und unteren Arme sind jeweils per Druck befestigt. Zum Ausbau des oberen Arms ziehen Sie ihn nach unten. Den unteren Arm müssen Sie zum Ausbau nach oben ziehen. Spülen Sie die Wascharme unter fließendem Wasser ab, beseitigen Sie Verstopfungen von den Auslasslöchern und bauen Sie die Arme wieder ein.

### 6.5 Reinigung des Gerätes

Zur Reinigung der Außenseiten und der Bedienfolie verwenden Sie einen weichen mit Seifenwasser oder einem Oberflächendesinfektionsmittel befeuchteten Lappen. Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel. Zur Reinigung der Kammer verwenden Sie die Funktion „Reinigung“ aus dem Menü mit 0,5 l Essig- oder Zitronensäure in der Kammer. Details dazu finden Sie in Kapitel 4.8.

**HINWEIS:** Alle 25 Zyklen wird der Anwender an eine Kammerreinigung erinnert. Drücken Sie OK, um den gewählten Reinigungszyklus fortzusetzen, denken Sie aber daran, bei der nächsten Gelegenheit eine Kammerreinigung durchzuführen.

### 6.6 Gerät für Transport vorbereiten



Wenn Sie das Gerät für Transport oder Lagerung vorbereiten, sollte Schmutzwasser aus der Kammer entfernt werden. Schmutzwasser im Gerät kann biologische Verunreinigungen enthalten. Führen Sie im Set-up Menü die Funktion Für Transport vorbereiten aus. Das Gerät pumpt alles Schmutzwasser aus der Kammer. Falls ein kleiner Rest verbleibt, saugen Sie ihn mit saugfähigem Material auf. Dann entsorgen Sie das saugfähige Material gemäß den Vorschriften für biologische Abfälle.

Wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, nutzen Sie den Ablaufschlauch mittig, unterhalb des Gerätes, um das Wasser aus der Kammer und dem System zu entleeren. Dann entriegeln Sie die Tür mit dem Türhebel (siehe Kapitel 4.9), entfernen den Grob- und den Fein-Filter (siehe Kapitel 6.4) und saugen das verbleibende Wasser aus dem Pumpensumpf mit saugfähigem Material auf.

## 6. Pflege und Wartung

### 6.7 Jährliche Wartung

Wenn die Meldung „Vorsorgliche Wartung nötig. Servicedienst anrufen“ erscheint, ist die jährliche Wartung fällig. Zur weiteren Nutzung der HYDRIM drücken Sie OK. Wenden Sie sich baldmöglichst an Ihren Servicetechniker. Die jährliche Wartung sollte 365 Tage nach der Erstinstallation oder dem letzten Service durchgeführt werden.

### 6.8 Test und Validierung des Gerätes

Die nachfolgend empfohlenen, regelmäßigen Wartung des HYDRIM C61wd G4 Reinigungs- und Desinfektionsgerätes sollten vom Anwender und von Technikern durchgeführt werden.

Um die konstante Reinigungsleistung des Gerätes zu gewährleisten, empfiehlt SciCan die Einhaltung folgender regelmäßiger Prüfprotokolle.

- **WICHTIGE HINWEISE:**

Dieses Dokument nennt die Mindestanforderungen, damit das Gerät gemäß den Spezifikation arbeitet. In manchen Regionen können lokale/nationale Richtlinien zusätzliche Prüfungen erfordern. Für Details hierzu wenden Sie sich an Ihren Händler oder die örtlichen Gesundheitsbehörden.

- Installation, Inbetriebnahme und jährliche Wartung **MÜSSEN** durch von SciCan autorisierte Techniker durchgeführt werden. Unterlassene Wartung des Gerätes kann die Ergebnisse der folgenden Tests ungültig machen.

Folgende Tabelle zeigt die empfohlenen regelmäßigen Prüfprotokolle:

Wann	Wer	Was
<b>Nach der Installation</b>	Durch einen von SciCan autorisierten Techniker	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfung der Inbetriebnahme/Installation wie im mit dem Gerät gelieferten Installationsdokument angegeben.</li><li>• Erstvalidierung, falls durch örtliche Vorschriften gefordert.</li></ul>
<b>Tägliche Tests und Kontrollen</b>	Durch den Anwender	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfung der Türverriegelung</li><li>• Prüfung der Wascharmrotation</li><li>• Prüfung der Türdichtung</li><li>• Prüfung der Einschübe</li><li>• Prüfung und Reinigung der Kammerfilter</li><li>• Visuelle Kontrolle (Inspektion mit Lupe) jeder Beladung auf verbliebenen Schmutz.</li></ul>
<b>Jährlich</b>	Durch einen von SciCan autorisierten Techniker	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jährlicher Wartungsplan wie im Servicehandbuch angegeben</li></ul>
<b>Jährlich</b>	Durch einen von SciCan autorisierten Techniker	<ul style="list-style-type: none"><li>• Re-Validierung, falls durch örtliche Vorschriften gefordert.</li></ul>

## 6. Pflege und Wartung

### Vom Anwender durchzuführendes Tests:

#### Prüfung der Türverriegelung

Dieser Test soll sicherstellen, dass die Tür nicht im laufenden Zyklus geöffnet werden kann und dass ein Zyklus nicht bei geöffneter Tür startet. Zu diesem Zweck versuchen Sie unmittelbar nach Beginn eines Zyklus, die Tür am Griff zu öffnen. **Vorsicht – VERSUCHEN SIE DAS NICHT, wenn sich die Wascharme drehen und/oder das Wasser erhitzt ist.** Die Tür darf sich nicht öffnen. Wenn Sie einen Zyklus bei geöffneter Tür starten wollen, darf der Zyklus nicht beginnen. Falls das Gerät diesen Test nicht besteht, verwenden Sie es nicht weiter und vereinbaren Sie einen Kundendiensttermin mit Ihrem Händler.

#### Prüfung der Türdichtung

Prüfen Sie die Türdichtung visuell auf Ablagerungen oder Verschleiß. Falls die Dichtung abgenutzt oder beschädigt ist, rufen Sie Ihren Händler wegen des Kundendienstes an.

#### Prüfung der Rollwägen

Prüfen Sie die Rollwägen (Einschübe) visuell auf Verschleiß, Schäden und freilaufende Schienen im gesamten Bereich.

#### Prüfung der Kammerfilter

Entnehmen Sie die Filter und prüfen und reinigen sie wie in Kapitel 6.4 beschrieben.

#### Beladungskontrolle

Kontrollieren Sie jede Ladung visuell auf verbliebenen Schmutz. Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät soll sicherstellen, dass die Oberflächen der Instrumente frei von Ablagerungen sind, die den Sterilisationsprozess beeinträchtigen könnten.

Vor der Sterilisation muss eine visuelle Kontrolle der aufbereiteten Instrumente jeder Charge erfolgen, um sicher zu stellen dass keine Verschmutzungen auf den Instrumenten verblieben sind.

Falls noch Ablagerungen vorhanden sind, darf das Instrument nicht als sauber angesehen werden und muss vor der Sterilisation nochmals im HYDRIM aufbereitet werden.

**HINWEIS:** Bestimmte ablagerungsfähige Materialien wie Zement und Verbundstoffe werden im HYDRIM nicht von den Instrumenten entfernt. Falls sich Rückstände solcher Materialien auf den Instrumenten befinden, kann ein vorheriges Abscheuern nötig sein.

## 7. Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache und Lösungen
<b>Instrumente sind nicht sauber</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überladen Sie die Kassetten und Instrumentenkörbe nicht.</li> <li>• Laden Sie nicht zu viele Kassetten in den HYDRIM.</li> <li>• Verwenden Sie das Intensiv-Programm für Kassetten und klappbare Instrumente.</li> <li>• Kontrollieren Sie die Filter und Wascharme auf Fremdkörper.</li> <li>• Erhöhen Sie die Waschdauer. Siehe Kapitel 4.8.</li> </ul>
<b>Touchscreen / Gerät geht nicht an</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, dass der Netzschalter EIN geschaltet ist.</li> <li>• Prüfen Sie, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt.</li> <li>• Prüfen Sie, ob eine Sicherung oder ein Schutzschalter ausgelöst hat – wenden Sie sich an den technischen Service.</li> </ul> <p>HINWEIS: Sicherungen dürfen NICHT vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an einen autorisierten Techniker. Zum Schutz vor Brandgefahr dürfen nur 15A, 250V F-Sicherungen verwendet werden.</p>
<b>Die Wascharme drehen sich nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie die Wascharme, reinigen diese und setzen sie wieder ein.</li> <li>• Überprüfen Sie ob sich in der Kammer Gegenstände befinden die den Vorgang möglicherweise blockieren.</li> </ul>
<b>Die Tür kann nicht geöffnet werden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Zyklus ist nicht abgeschlossen.</li> <li>• Der Zyklus wurde abgebrochen, aber das Gerät ist noch nicht vollständig entleert.</li> </ul>
<b>Betriebszyklen brauchen scheinbar zu lange</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Wasser ist nicht heiß genug. Prüfen Sie, dass die Temperatur des zugeführten Warmwassers im empfohlenen Bereich liegt.</li> <li>• Prüfen Sie, dass die Warm- und Kaltwasserschläuche nicht vertauscht sind.</li> </ul>
<b>Die Meldung „Kein Waschmittel“ wird angezeigt, obwohl noch ein großer Rest der Chemikalie im Behälter ist</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie den Chemikalienschlauch auf Knicke.</li> <li>• Prüfen Sie den Deckel auf Dichtheit.</li> <li>• Setzen Sie die Reinigungslösung neu ein, siehe Kapitel 6.1</li> </ul>

## 7. Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache und Lösungen
<b>Die Trocknung ist mangelhaft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhen Sie die Trocknungszeit. Siehe Kapitel 4.8.</li> <li>• Wechseln Sie den HEPA-Filter. Ersatzteil#: 01-113277S Luftfilter, C61</li> </ul>
<b>Meldung „Vorsorgliche Wartung nötig. Servicedienst anrufen“ erscheint</b>	Die jährliche Wartung soll 365 Tage nach der Erstinstallation oder der letzten Wartung durchgeführt werden. Rufen Sie den Kundendienst an.
<b>Meldung „Luftfilter austauschen“ erscheint</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechseln Sie den HEPA-Filter. Siehe Kapitel 6.3.</li> <li>• Wenn der Filter ausgetauscht wurde und die Meldung weiterhin erscheint, setzen Sie den Trocknungszähler zurück. Siehe Kapitel 3.11</li> </ul>
<b>Meldung „LCS-Filter austauschen“ erscheint</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechseln Sie den biologischen Filter. Siehe Kapitel 6.3.</li> <li>• Wenn der Filter ausgetauscht wurde und die Meldung weiterhin erscheint, setzen Sie den LCS-Zähler zurück. Siehe Kapitel 3.12.</li> </ul>
<b>„Luftfilter fehlt. Filter installieren“</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie den korrekten Einbau des HEPA-Filters (mit Pfeil in der richtigen Position).</li> </ul>
<b>USB-Speichergerät mit allen Zyklusdaten verloren</b>	<p>Wenn Sie alle Zyklusdaten des Gerätes auf ein neues USB-Speichermedium kopieren müssen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stecken Sie das neue USB-Gerät an.</li> <li>2. Wählen Sie das Symbol USB aus.</li> <li>3. Wählen Sie Zyklusinformationen.</li> <li>4. Im Dialog Zyklusinformationen wählen Sie oben rechts das USB-Symbol.</li> <li>5. Wählen Sie Kopieren, so dass alle Daten des Zyklusverlaufs des Gerätes auf das neue Medium kopiert werden.</li> </ol>
<b>Keine Internetverbindung</b>	<p>Wählen Sie das Symbol Konnektivität, um den Dialog Verbindungsstatus zu öffnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn ein rotes X neben der IP erscheint: Sie haben keine Netzwerkverbindung. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.</li> <li>• Wenn ein rotes X neben Internet erscheint: Sie haben keine Internetverbindung. Wenden Sie sich an Ihren Internetprovider.</li> </ul>

# 7. Fehlerbehebung

## Fehlermeldungen

<b>Fehler</b>	<b>Was das bedeutet</b>	<b>Was zu tun ist</b>
<b>CF1 Heizungsfehler</b>	Das Wasser erreicht die geforderte Temperatur nicht in der angegebenen Zeit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kundendienst anrufen</li></ul>
<b>CF2 Fehler Kammerbefüllung</b>	Das Wasser füllt die Kammer nicht in der angegebenen Zeit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie, dass die Wasserschläuche nicht geknickt sind. Öffnen Sie die Wasserabsperrentile</li></ul>
<b>CF3 Lesefehler Kammertemperatur</b>	Defekter Sensor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kundendienst anrufen</li></ul>
<b>CF4 Fehler Wasserentleerung</b>	Wasser kann aus dem Gerät nicht ablaufen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt ist</li><li>• Prüfen Sie, dass die Filter im Kammerboden nicht blockiert sind</li><li>• Prüfen Sie, dass der Abfluss auf der im Installationshandbuch angegebenen Höhe liegt.</li></ul>
<b>CF5 Fehler Desinfektion</b>	Temperatur ist während der Desinfektion auf unter 90°C gefallen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kundendienst anrufen.</li></ul>
<b>CF7 Programm abgebrochen oder unterbrochen</b>	Stromausfall.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stromzufuhr zum Gerät wiederherstellen.</li><li>• Programm neu starten.</li></ul>
<b>CF8 Fehler Luftherhitzer</b>	Lufttemperatur ist während der Trocknung gefallen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kundendienst anrufen.</li></ul>
<b>CF9</b>	Systemfehler.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kundendienst anrufen.</li></ul>
<b>CF10 Fehler Trocknungssystem</b>	Problem mit der Trocknung.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kundendienst anrufen.</li></ul>
<b>CF11 Fehler Dosiersystem</b>	Problem mit dem Dosiersystem.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kundendienst anrufen.</li></ul>



## 7. Fehlerbehebung

<b>Fehler</b>	<b>Was das bedeutet</b>	<b>Was zu tun ist</b>
<b>CF12 Wasserfilter verstopft (nur für Modelle mit LCS)</b>	Problem mit Innenreinigungssystem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, dass der LCS-Adapter richtig in der Kammer befestigt ist.</li> <li>• Sie haben LCS beim Start ausgewählt, aber LCS ist nicht installiert.</li> <li>• Wenn die Meldung bestehen bleibt, Kundendienst anrufen.</li> </ul>
<b>CF13 Fehler Temperaturvalidierung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundendienst anrufen.</li> </ul>
<b>CF14 Wasser für Vorreinigung zu heiß</b>	Wasser für Vorreinigung zu heiß.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, dass die Wasserschläuche (Warm/Kalt) nicht vertauscht sind. Zyklus neu starten.</li> </ul>
<b>CF15 Kammerüberlauf</b>	Wasserspeicher Überlaufschalter ausgelöst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programm neu starten.</li> <li>• Kundendienst anrufen.</li> </ul>
<b>CF16 Fehler Umgebungstemperatur</b>	Gerät ist zu heiß oder überhitzt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raum- oder Umgebungstemperatur ist zu hoch und das Gerät kann nicht ausreichend kühlen.</li> <li>• Wenn die Meldung bestehen bleibt, Kundendienst anrufen.</li> </ul>
<b>CF17 Fehler Trocknungssystem</b>	Trocknungssystem ist überhitzt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HEPA-Filter prüfen.</li> <li>• Prüfen Sie, ob der Luftauslass blockiert ist.</li> <li>• Wenn die Meldung bestehen bleibt, Kundendienst anrufen.</li> </ul>
<b>CF18 Wasserfilter Drucksensor klemmt (nur für wd-Modelle mit LCS)</b>	Problem mit Innenreinigungssystem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundendienst anrufen.</li> </ul>

## 7. Fehlerbehebung

<b>Fehler</b>	<b>Was das bedeutet</b>	<b>Was zu tun ist</b>
<b>CF21 Fehler Dosierpumpe</b>	Fehler im Chemikaliendosiersystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehen Sie den Verschluss der Reinigungslösung fest zu.</li> <li>• Prüfen Sie ob die Reinigungslösung dicht ist.</li> <li>• Wenn die Meldung bestehen bleibt, Kundendienst anrufen.</li> </ul>
<b>CF22 Fehler Lufttemperatur</b>	Defekter Sensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundendienst anrufen.</li> </ul>
<b>CF23 Drehzahl oberer Wascharm zu gering</b>	Oberer Wascharm dreht zu langsam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob die Ladung den Wascharm blockiert.</li> <li>• Überprüfen Sie alle Öffnungen der Wascharme auf Ablagerungen.</li> <li>• Wenn die Meldung bestehen bleibt, Kundendienst anrufen.</li> </ul>
<b>CF24 Drehzahl unterer Wascharm zu gering</b>	Unterer Wascharm dreht zu langsam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob die Ladung den Wascharm blockiert.</li> <li>• Überprüfen Sie alle Öffnungen der Wascharme auf Ablagerungen.</li> <li>• Wenn die Meldung bestehen bleibt, Kundendienst anrufen.</li> </ul>
<b>CF25 Referenzspannungsfehler</b>	Systemfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundendienst anrufen.</li> </ul>
<b>CF26 Luftventil-Fehler</b>	Problem mit Luftdruck in der Luftleitung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundendienst anrufen.</li> </ul>
<b>CF27 Hardware-Fehler</b>	Hardware-Fehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundendienst anrufen.</li> </ul>

## 8. Garantie

### **Beschränkte Garantie**

Für die Dauer eines Jahres garantiert SciCan, dass der HYDR/M C61wd G4 in neuem und unbenutztem Zustand nach der Herstellung im normalen Betrieb nicht infolge von Fehlern in Material und Verarbeitung ausfällt, die nicht auf offensichtlichen Missbrauch oder Unfall zurückzuführen sind. Bei einem Ausfall infolge solcher Fehler in diesem Zeitraum soll die ausschließliche Abhilfe die kostenlose Reparatur oder der Austausch aller fehlerhaften Teile nach Ermessen von SciCan sein, sofern SciCan innerhalb von dreißig (30) Tagen nach einem solchen Ausfall schriftlich informiert wurde und sofern die defekten Teile frachtfrei an SciCan zurückgesendet werden.

Diese Garantie gilt, wenn das Produkt zusammen mit der Original-Rechnung von einem autorisierten SciCan-Händler eingeschickt wird und wenn diese Rechnung den Artikel anhand der Seriennummer identifiziert und das Kaufdatum deutlich ausweist. Es wird kein anderer Nachweis akzeptiert. Nach Ablauf eines Jahres sollen alle Pflichten und Garantieansprüche gegenüber SciCan hinsichtlich der Produktqualität als endgültig erfüllt gelten und sämtliche Haftung dafür enden und danach soll keine Klage oder Vertragsverletzung hinsichtlich einer solchen Garantie gegenüber SciCan geltend gemacht werden können.

Jede ausdrückliche hier nicht angegebene Garantie und jede stillschweigende Garantie oder Darstellung zur Leistung und jedes Rechtsmittel gegenüber einem Vertragsbruch, welches außer durch diese Bestimmung durch Schlussfolgerung, kraft Gesetzes oder Handelsbrauches entstehen könnte, sowie alle Zusicherungen allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck hinsichtlich sämtlicher von SciCan hergestellter Produkte sind ausgeschlossen und werden von SciCan abgelehnt.

Um Ihre Produktgarantie bei SciCan zu registrieren, öffnen Sie die Webseite [Scican.com](http://Scican.com), klicken auf das betreffende Land und dann auf das Register Ihre Garantie registrieren.

## 9. Spezifikationen

<b>Maschinenabmessungen:</b>	Länge:	52 cm/20.5"
	Breite:	59,8 cm/23.5"
	Tiefe:	52,6 cm/20.7"
	Tiefe bei geöffneter Tür:	82,9 cm/32.6"
<b>Gewicht :</b>		44 kg/97 lbs
<b>Betriebsgeräusch:</b>		65 dB
<b>Warm- und Kaltwasseranschlüsse</b>		G 3/4"
<b>Eingangswasserdruck:</b>		1-10 bar
<b>Warmwasserzulauftemperatur:</b>		60°C/140°F
<b>Ablauf:</b>		3/4"
<b>Trocknungssystem:</b>		Heizer 1 kW
<b>Elektrischer Anschluss:</b>		200-230 V Wechselspannung ±10%, einphasig, 50 Hz, 12A
<b>Schutzklasse:</b>		Klasse I
<b>Verschmutzungsgrad des Gerätes:</b>		Verschmutzungsgrad 2
<b>Installationskategorie des Gerätes:</b>		Installationskategorie II
<b>Maximale relative Luftfeuchte:</b>		80% bei Temperaturen bis zu 31°C/88°F 50% bei Temperaturen bis zu 40°C/104°F
<b>Betriebstemperaturbereich:</b>		5°C - 40°C/41°-104°F
<b>Max. Höhe über dem Meeresspiegel:</b>		2000 m/6562 feet
<b>Spannungsversorgung:</b>		+ / -10% des Nominalwertes
<b>Sicherungen:</b>		15A, 250V, Typ F

# 10. SciCan software-produktlizenz

Diese Vereinbarung zum SciCan Software-Produkt gilt ab dem Lieferdatum (**“Datum des Inkrafttretens”**) an den Kunden der Ausrüstung, die das SciCan Software-Produkt enthält (die **“SciCan-Ausrüstung”**) zwischen SciCan Ltd., 1440 Don Mills Road, 2nd Floor, Toronto, Kanada, M3B 3P9 (**“SciCan”**) und dem Käufer oder Leasingnehmer der SciCan-Ausrüstung sowie allen seinen Endanwendern (gemeinschaftlich **“Kunde”**). **“SciCan Software-Produkt”** umfasst sämtliche in der SciCan-Ausrüstung enthaltene proprietäre Software von SciCan.

Diese SciCan Software-Produktlizenz bildet die gesamte Vereinbarung (**“Vereinbarung”**) zwischen SciCan und dem Kunden hinsichtlich der kundenseitigen Nutzung des SciCan Software-Produkts. Kein Kaufauftrag, der eine Änderung oder Ergänzung dieser Vereinbarung behauptet, soll die Bedingungen dieser Vereinbarung ergänzen oder ändern, selbst wenn er von SciCan unterschrieben oder paraphiert ist.

## ARTICLE 1 - INTERPRETATION

### 1.1 Definitionen

- (a) **“Tochtergesellschaft”** bedeutet jede verbundene juristische Person, die den Kunden kontrolliert, unter seiner Kontrolle ist oder unter gemeinsamer Kontrolle mit dem Kunden ist.
- (b) **“Vertrauliche Informationen”** bedeutet alle nicht-öffentlichen, kommerziellen und sensiblen Informationen beider Parteien und im Fall von SciCan das SciCan Software-Produkt, Updates, die Dokumentation sowie alle Informationen von SciCan, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe als vertraulich oder firmeneigen gekennzeichnet sind.
- (c) **“Kontrolle”** bedeutet die direkte oder indirekte Beherrschung, die das Management und die Arbeitsrichtlinien einer juristischen Person bestimmt oder bestimmen kann infolge der Stimmrechtsmehrheit (mindestens einundfünfzig Prozent (51%) der stimmberechtigten oder Anteilspapiere), Vertrag, Stimmbindungsvertrag oder sonstig.
- (d) **“Dokumentation”** bedeutet die Bedienhandbücher zum Einsatz des SciCan Software-Produkts und der SciCan-Ausrüstung, die zusammen mit der SciCan-Ausrüstung geliefert werden.
- (e) **“SciCan Lizenzgeber”** bedeutet Dritte, die hinsichtlich ihrer Software SciCan das Recht zum Vertrieb gewährt haben.
- (f) **“Updates”** bedeutet Veränderungen durch SciCan am SciCan Software-Produkt, die SciCan allgemein seinen Kunden ohne Zusatzkosten zur Verfügung stellt, die derzeit Abonnenten eines Support-Services sind und die derzeit gegebenenfalls Gebühren für den Support-Service bezahlen, sofern diese anfallen. Updates werden für die Zwecke dieser Vereinbarung Teil des SciCan Software-Produkts.

# 10. SciCan software-produktlizenz

## ARTICLE 2 - LIZENZ

### 2.1 Lizenzgewährung

Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung gewährt SciCan dem Kunden eine unbefristete, vollständige, nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz für die Nutzung des SciCan Software-Produkts alleinig am Standort des Kunden und nur in Verbindung mit dem Betrieb der SciCan-Ausrüstung für die internen Geschäftszwecke des Kunden.

## ARTICLE 3 - LIZENZBESCHRÄNKUNGEN

### 3.1 Beschränkungen

Außer dem, was hierin ausdrücklich genehmigt ist, wird der Kunde nicht erlauben und nicht durchführen:

- (a) Kopieren oder Ändern des SciCan Software-Produkts und der Dokumentation;
- (b) Nachbau, Dekompilierung, Übersetzung, Demontage oder Aufdeckung des Quellcodes des gesamten oder teilweisen SciCan Software-Produkts;
- (c) Vertrieb, Veröffentlichung, Marketing, Vermietung, Leasing oder Service-Inanspruchnahme oder Übertragung des SciCan Software-Produkts oder der Dokumentation an Dritte, außer als Bestandteil und im Paket mit dem Verkauf der SciCan-Ausrüstung, die das SciCan Software-Produkt enthält;
- (d) Offenlegung der Ergebnisse von Leistungstests der SciCan-Ausrüstung oder der SciCan Software gegenüber Dritten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von SciCan; oder
- (e) Offenlegung von irgendwelchem hiernach zur Verfügung gestellten Quellcode (sofern zutreffend) gegenüber irgendwelchen Dritten.

## ARTICLE 4 - UPDATES

### 4.1 Updates

(a) Sofern der Kunde ein Konto eröffnet und SciCan alle erforderlichen Informationen übermittelt und gegebenenfalls die zugehörigen Gebühren für Updates bezahlt hat, liefert SciCan Updates für das SciCan Software-Produkt gemäß den Update-Richtlinien und allgemein gültigen Bestimmungen von SciCan. Vor dem Auslaufen von Updates für das SciCan Software-Produkt informiert SciCan den Kunden mindestens sechs (6) Monate im Voraus. Der Kunde ermöglicht SciCan den Einsatz von Fernzugriffs-Software, um bei der Lösung von Fragen oder Problemen zu assistieren. Update-Gebühren werden sofern zutreffend jährlich im Voraus in Rechnung gestellt.

## **10. SciCan software-produktlizenz**

(b) SciCan hat keine Verpflichtung für Updates oder Unterstützung, falls der Kunde eine erforderliche Zahlung schuldet oder anderweitig wählt, den Update-Service nicht fortzuführen. Um den Support-Service fortzuführen oder wieder neu aufzunehmen, muss der Kunde SciCan zuerst die dann fällige jährliche Update-Gebühr sowie alle bisher unbezahlten Update-Gebühren bezahlen und zustimmen, dass alle bisherigen Updates auf die SciCan-Ausrüstung geladen werden.

(c) SciCan ist nicht zu Updates verpflichtet für jegliche (i) veränderte, beschädigte oder modifizierte SciCan-Ausrüstung oder SciCan Software-Produkte, (ii) SciCan Software-Produkte in einer nicht aktuellen oder vorangegangenen Version, (iii) SciCan Software-Produkte, deren Probleme durch Nachlässigkeit des Kunden oder andere Gründe außerhalb der Kontrolle von SciCan entstanden sind sowie (iv) Fehler, die bei den Einrichtungen von SciCan oder per Fernzugriff auf die Einrichtung des Kunden nicht reproduzierbar sind.

### **ARTICLE 5 - EIGENTUM**

#### **5.1 Eigentum**

SciCan behält sich alle Rechte, Ansprüche und Interessen am SciCan Software-Produkt, den Updates und der Dokumentation sowie allen Kopien davon vor. Sofern nicht in dieser Vereinbarung anderweitig ausdrücklich gewährt, werden hiermit keinerlei Lizenzen, Rechte oder Ansprüche an irgendwelche Warenzeichen von SciCan, Urheberrechte, Handelsnamen oder Servicekennzeichen gewährt.

### **ARTICLE 6 - PATENT- UND URHEBERRECHTS-HAFTUNGSFREISTELLUNG**

#### **6.1 SciCan Haftungsfreistellung**

SciCan wird den Kunden bezüglich aller Kosten verteidigen und freistellen (einschließlich angemessener Anwaltshonorare), die aus einer Klage entstehen, wenn das im Rahmen dieser Vereinbarung bereitgestellte und genutzte SciCan Software-Produkt ein eingetragenes Warenzeichen oder Patent verletzt, vorausgesetzt dass:

- (a) der Kunde SciCan schriftlich innerhalb von dreißig (30) Tagen über die Klage informiert;
- (b) SciCan die alleinige Kontrolle über die Verteidigung und alle zugehörigen Vergleichsverhandlungen hat, und
- (c) der Kunde SciCan die nötige Unterstützung, die Informationen und die Befugnis gewährt, die zur obengenannten Ausführung erforderlich sind.

Angemessene dem Kunden entstandene Kosten für die Bereitstellung dieser Unterstützung werden von SciCan zurückerstattet.

# 10. SciCan software-produktlizenz

## 6.2 Ausnahme

SciCan haftet nicht für Ansprüche aus Markenverletzungen infolge:

- (a) der Verwendung einer veralteten oder modifizierten Version des SciCan Software-Produkts (außer bei solchen Veränderungen oder Modifikationen, die von SciCan oder auf Anweisung von SciCan erfolgt sind), falls eine solche Verletzung durch die Verwendung einer aktuellen unveränderten Version des SciCan Software-Produkts hätte vermieden werden können; oder
- (b) der Kombination, Nutzung oder Verwendung des SciCan Software-Produkts mit Hardware, Programmen oder Daten, die nicht bereitgestellt oder anderweitig von SciCan genehmigt sind, falls eine solche Verletzung durch die Verwendung des SciCan Software-Produkts ohne derartige Hardware, Programme oder Daten hätte vermieden werden können.

## 6.3 Pflichten von SciCan

Falls das SciCan Software-Produkt für eine Markenverletzung verantwortlich gemacht oder von SciCan derart angesehen wird, oder die Nutzung des SciCan Software-Produkts durch den Kunden untersagt ist, hat SciCan auf seine Kosten die Option:

- (a) das SciCan Software-Produkt so anzupassen, dass es nicht verletzend ist; oder
- (b) für den Kunden eine Lizenz zu erhalten, damit er das SciCan Software-Produkt weiter nutzen kann; oder
- (c) das SciCan Software-Produkt durch eine andere Software zu ersetzen, die angemessen für die Steuerung der SciCan-Ausrüstung geeignet ist; oder
- (d) falls keine der vorgenannten Abhilfemaßnahmen wirtschaftlich machbar ist, die Lizenz für das verletzende SciCan Software-Produkt zu kündigen und den Preis der betroffenen SciCan-Ausrüstung anteilig zu erstatten bezogen auf eine Fünfjahresdauer beginnend ab dem Datum des Inkrafttretens.

## 6.4 Gesamte Haftung für Markenverletzungen

Dieser Artikel 6 erklärt die gesamte Haftung von SciCan bezüglich Markenverletzungen oder widerrechtlicher Aneignung geistiger Eigentumsrechte.

## ARTICLE 7 - GARANTIE

### 7.1 Garantie

SciCan garantiert, das Recht und/oder die Befugnis zur Vergabe von Lizenzen für das SciCan Software-Produkt zu haben. Das ausschließliche Rechtsmittel des Kunden hinsichtlich des Bruchs dieser Bestimmung ist gemäß Artikel 6 (Patent- und Urheberrechts-Haftungsfreistellung).



# 10. SciCan software-produktlizenz

## 7.2 Funktionalität

SciCan garantiert für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab dem Datum des Inkrafttretens, dass das SciCan Software-Produkt, sofern es vom Kunden unverändert ist und alle angebotenen Updates installiert sind, in allen wesentlichen Aspekten die in der Dokumentation beschriebenen Funktionen ausführt, wenn es mit der zugehörigen SciCan-Ausrüstung betrieben wird.

## 7.3 Service

SciCan behält sich das Recht vor, dem Kunden von SciCan durchgeführte Servicearbeiten im Zusammenhang mit gemeldeten Fehlern in Rechnung zu stellen, wenn sich später als Ursache Bedienfehler, ungeschulte Benutzer, elektrische Fehler am Standort, nicht gelieferte oder von SciCan empfohlene Software oder Hardware oder Änderungen oder Ergänzungen an der SciCan-Ausrüstung oder dem SciCan Software-Produkt außer durch Updates oder durch Personen außer den Mitarbeitern oder Beratern von SciCan herausstellen.

## 7.4 HAFTUNGSABLEHNUNG

OBNSTEHENDE GARANTIE SIND AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE VON ALLEN ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIE EINSCHLIESSLICH DER IMPLIZITEN GARANTIE DER MARKTÜBLICHEN QUALITÄT, GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, FREIHEIT VON RECHTSMÄNGELN SOWIE DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

## ARTICLE 8 - HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

### 8.1 BESCHRÄNKTE HAFTUNG

AUSSER WIE IN Artikel 6 (PATENT- UND URHEBERRECHTS-HAFTUNGSFREISTELLUNG) ANGEZEIGT, WIRD SCICANS HAFTUNG FÜR SCHÄDEN GEMÄSS DIESER VEREINBARUNG IN KEINEM FALLE DEN VOM LIZENZNEHMER GEZAHLTEN BETRAG AN SCICAN FÜR DIE SCICAN-AUSRÜSTUNG, IN DEREN ZUSAMMENHANG DIE FORDERUNG ENTSTANDEN IST, ÜBERSTEIGEN. IN KEINEM FALLE HAFTET SCICAN FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE ODER FOLGERICHTIGE SCHÄDEN EINSCHLIESSLICH UNTER ANDEREM DEM VERLUST VON DATEN ODER GEWINNEN, DIE ENTSTEHEN, AUCH WENN AUF DIE GEFAHR SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. IN KEINEM FALLE HAFTEN DIE LIZENZNEHMER VON SCICAN FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN, SPEZIELLEN, INDIREKTEN, FOLGERICHTIGEN, ZUFÄLLIGEN ODER MUSTERHAFTEN SCHÄDEN, DIE AUS DIESER VEREINBARUNG ENTSTEHEN, UNGEACHTET DER FORM DIESER AKTION, EGAL OB DIESE AUF VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER EINER JURISTISCHEN THEORIE BERUHT. DIE PARTEIEN VEREINBAREN DIE VERTEILUNG DER HAFTUNGSRISEN, DIE IN DIESEM KAPITEL 8.1 DARGELEGT IST.

# 10. SciCan software-produktlizenz

## ARTICLE 9 - VERTRAULICHKEIT

### 9.1 Wahrung der Vertraulichkeit

Aufgrund des Kontos bei SciCan, welches der Kunde zum Zweck der Registrierung der SciCan-Ausrüstung und für den Erhalt von Updates eröffnet, erhält und besitzt SciCan Vertrauliche Informationen sowie persönliche Informationen zum Kunden. Die von SciCan erhaltenen Kundeninformationen enthalten keine Informationen über die Topologie des lokalen Netzwerkes ("LAN") oder andere mit dem LAN verbundene Geräte. Die von SciCan erhaltenen persönlichen Informationen umfassen Namen der Personen, an die E-Mails von SciCan hinsichtlich der Funktion der SciCan-Ausrüstung und der Updates gesendet werden können. Jede Seite bestätigt der anderen, dass sie aufgrund ihrer Beziehung für Lizenz und Update-Service Zugang zu Vertraulichen Informationen der anderen Seite haben kann. Beide Seiten vereinbaren sowohl während der Laufzeit dieser Vereinbarung als auch nach deren Beendigung die Vertraulichen Informationen des anderen vertraulich zu behandeln. Das SciCan Software-Produkt soll dauerhaft als vertraulich behandelt werden. Beide Seiten vereinbaren, die Vertraulichen Informationen des anderen in keiner Form Dritten zugänglich zu machen (außer ihren Mitarbeitern oder Beratern, die einer Geheimhaltungspflicht unterliegen) oder die Vertraulichen Informationen des jeweilig anderen für irgendwelche Zwecke außer den in dieser Vereinbarung genannten Zwecken zu verwenden. Jede Seite unternimmt wirtschaftlich angemessene Schritte, um zu gewährleisten, dass Vertrauliche Informationen durch seine Mitarbeiter oder Berater in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikel 9 nicht veröffentlicht oder weitergegeben werden. Die Parteien vereinbaren, dass die Bestimmungen dieser Vereinbarung als vertraulich anzusehen sind.

### 9.2 Ausnahmen

Ungeachtet aller in dieser Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen muss keine Partei die Vertraulichkeit wahren für folgende Informationen:

- (a) Informationen, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe an die empfangende Seite öffentlich sind;
- (b) Informationen, die nach Bekanntgabe öffentlich werden, außer durch einen Bruch dieser Vereinbarung;
- (c) Informationen, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe im Besitz der empfangenden Seite waren und die nicht direkt oder indirekt von der bekanntgebenden Seite erlangt wurden;
- (d) Informationen, für die die empfangende Seite nachweisen kann, dass sie unabhängig von der Bekanntgabe durch die bekanntgebende Seite durch eigene Forschung und Entwicklung erhalten wurden;
- (e) Informationen, welche die empfangende Seite von Dritten erhält, sofern diese Informationen von dem Dritten nicht unter Maßgabe der Vertraulichkeit von der bekanntgebenden Seite erhalten wurden; oder

# 10. SciCan software-produktlizenz

(f) Informationen, die im Einklang mit geltendem Recht oder auf Gerichtsbeschluss entstanden sind, sofern die andere Seite angemessen über ein solches Gesetz oder einen Gerichtsbeschluss informiert worden ist und eine Möglichkeit hatte, dieses zu verhindern zu versuchen.

## ARTICLE 10 - ALLGEMEINES

### 10.1 Recht und Gerichtsstand

Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen der Provinz Ontario und den geltenden Bundesgesetzen Kanadas. In keinem Fall unterliegt diese Vereinbarung dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.

### 10.2 Mitteilungen

Alle Mitteilungen müssen schriftlich erfolgen und per Express-Post oder Übernacht-Kurier gesendet oder per Fax übertragen und per Post an die auf der ersten Seite dieser Vereinbarung angegebenen Adressen bestätigt werden oder an solche anderen Adressen, welche die jeweils andere Seite mindestens zehn (10) Tage vor der schriftlichen Mitteilung der anderen Seite angeben muss. Mitteilungen an SciCan werden an den **privacy@SciCan.com** gesendet. Eine Mitteilung gilt als ausgeführt nach einer persönlichen Übermittlung (bei einem Übernacht-Kurier oder per Fax) oder nach fünf (5) Werktagen nach dem Absenden per Express-Post oder am nächsten Werktag bei Versand per Fax.

### 10.3 Übertragung

Der Kunde darf diese Vereinbarung nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SciCan übertragen (kraft Gesetzes oder anderweitig) oder das SciCan Software-Produkt weiterlizenzieren. Der Kunde darf jedoch die SciCan-Ausrüstung mit dem auf das interne Betriebssystem geladenen SciCan Software-Produkt verkaufen oder anderweitig loswerden. **Der Kunde bestätigt, dass für verkaufte oder losgewordene Ausrüstung keinerlei Updates verfügbar sind, solange nicht der Käufer oder Empfänger ein Konto für Upgrades bei SciCan eröffnet und die entsprechenden Gebühren bezahlt.** Jede verbotene Übertragung oder Sublizenzierung des SciCan Software-Produkts wird null und nichtig. Ungeachtet des Voranstehenden kann der Kunde nach schriftlicher Mitteilung an SciCan diese Vereinbarung an ein Tochterunternehmen des Kunden zuordnen oder anderweitig übertragen, sofern dieses Tochterunternehmen mit SciCan vereinbart, an die Bestimmungen dieser Vereinbarung gebunden zu sein.

### 10.4 Gerichtskosten

Falls eine gerichtliche Klage einschließlich Schlichtung erforderlich ist, um eine der Bestimmungen aus dieser Vereinbarung durchzusetzen oder auszulegen, soll sich die gewinnende Seite dieser Klage alle in diesem Zusammenhang angefallenen angemessenen Kosten und Ausgaben einschließlich der Anwaltshonorare zurückholen.

# 10. SciCan software-produktlizenz

## 10.5 Außerordentliche Rechtsmittel

Beide Seiten bestätigen, dass jeglicher Bruch ihrer Pflichten hinsichtlich der Eigentumsrechte der anderen Seite oder der Lizenznehmer dieser Seite der anderen Seite einen irreparablen Schaden zufügen kann, für den es nur inadäquate Rechtsmittel gibt und dass diese andere Partei und ihre Lizenznehmer zusätzlich zu allen anderen verfügbaren Rechtsmitteln zu einem Unterlassungsanspruch berechtigt sind.

## 10.6 Überschriften

Die Artikel- und Abschnittsüberschriften hierin dienen nur der Bequemlichkeit und haben keine inhaltliche Auswirkung auf die Auslegung dieser Vereinbarung.

## 10.7 Höhere Gewalt

Keine Seite haftet für Nichterfüllung infolge von Gründen außerhalb der eigenen Kontrolle.

## 10.8 Salvatorische Klausel

Falls irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung als nicht vollstreckbar angesehen wird, werden die Parteien die betroffene Bestimmung durch eine vollstreckbare Bestimmung ersetzen, deren Inhalt und ökonomische Auswirkung der betroffenen Bestimmung nahekommt.

## 10.9 Nichtanwendung

Sofern eine Partei ein hiernach bestehendes Recht nicht ausübt, gilt dies nicht als Verzicht dieser Partei auf die Ausübung eines solchen Rechtes oder irgendeines anderen Rechtes in der Zukunft.

## 10.10 Änderung

Dieser Vereinbarung kann nur durch ein schriftliches Dokument geändert werden, das von entsprechend befugten Vertretern beider Parteien ausgefertigt ist.

## 10.11 Ausschließlichkeitsvereinbarung

Dieser Vereinbarung ersetzt alle vorherigen mündlichen Absprachen, schriftlichen Mitteilungen und Darstellungen und tritt an deren Stelle.

# 11. Wi-Fi – Rechtliche Informationen

## 1. Vor Verwendung lesen – Rechtliche Informationen

Lesen Sie sich dieses Dokument durch, bevor Sie den HYDRIM verwenden. Dieser HYDRIM entspricht den Sicherheitsstandards und -vorschriften für Hochfrequenzgeräte in den Ländern, die seinen Import genehmigt haben. Eine aktuelle Liste dieser Länder erhalten Sie bei SciCan. Halten Sie sich bei Aufstellung und Verwendung an die folgenden Anweisungen.

**WICHTIGER HINWEIS:** Zur Einhaltung der Vorgaben für die Strahlenbelastung von der FCC\* & IC RF\*\* muss die für diesen Sender verwendete Antenne so installiert sein, dass stets ein Mindestabstand von 20 cm zu Personen gegeben ist, und sie darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder in Verbindung mit diesen verwendet werden.

\*FCC (Federal Communications Commission)

\*\*IC RF (Industry Canada Radiofrequency)

## 2. HYDRIM™-Funkadapter

Der HYDRIM enthält ein IEEE 802.11b,g,n-WLAN-Modul, das Funktionen ermöglicht, die bislang nur bei Verwendung einer Schnittstelle mit Kabelanschluss nutzbar waren.

Der Funkadapter unterstützt die Verbindung zu IEEE 802.11b,g,n-Netzwerken, WPA™ Personal und WPA2™ Personal (EAP\*-Typen: EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-FAST). Das WLAN-Modul nutzt den Frequenzbereich 2412–2462 MHz und hat eine maximale HF-Ausgangsleistung von 0,111 W.  
\*Extensible Authentication Protocol

Da der HYDRIM mit einem WLAN-Netz verbunden ist, hängt die Verbindungssicherheit von der Konfiguration der WLAN-Infrastruktur (Router oder Access Point) ab.

Ihre Wi-Fi® (WLAN)-Verbindungen zu sichern, ist ein wichtiges Element zum Schutz Ihrer persönlichen Daten. Ein WLAN-Netz mit WPA2™ bietet sowohl Sicherheit (Sie bestimmen, wer sich einwählt) als auch Privatsphäre (die Übertragungen können nicht von anderen gelesen werden) bei der Datenübermittlung durch Ihr Netzwerk. Zur größtmöglichen Sicherheit sollte Ihr Netzwerk nur Geräte mit der aktuellsten Sicherheitstechnologie umfassen – Wi-Fi Protected Access® 2 (WPA2). Wi-Fi CERTIFIED™ Geräte nutzen WPA2. Mehr unter: <http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf>

Die meisten Access Points, Router und Gateways haben einen voreingestellten Netzwerknamen (SSID) und administrative Anmeldeinformationen (Benutzername und Passwort), um die Konfiguration so einfach wie möglich zu machen. Diese Standardeinstellungen sollten geändert werden, sobald Sie Ihr Netzwerk einrichten. Mehr unter: <http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf>

Wichtig ist auch, dass Sie an weitere Maßnahmen zur Sicherung Ihrer Übertragungen denken, wenn diese Ihr WLAN-Netz verlassen. Mehr unter: <http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf>.

# 11. WiFi – Rechtliche Informationen

Tipps zur Sicherung eines neuen Netzwerks

- Ändern Sie den voreingestellten Netzwerknamen (SSID)
- Ändern Sie die administrativen Anmeldeinformationen (Benutzername und Passwort) für den Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen Ihres Access Points/Routers/Gateways
- Aktivieren Sie WPA2-Personal (auch WPA2-PSK genannt) mit AES-Verschlüsselung
- Erstellen Sie eine Netzwerk-Passphrase, die den empfohlenen Richtlinien entspricht
- Aktivieren Sie WPA2-Sicherheitsfunktionen auf Ihrem Client-Gerät und geben Sie die Passphrase für Ihr Netzwerk ein

Mehr unter: <http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf>

## 2.1. Sicherheitsprüfung bei einem vorhandenen Netzwerk

Wenn Sie Ihrem WLAN-Netz ein neues Gerät hinzufügen, ist das ein guter Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass Sie das größtmögliche Maß an Sicherheit anwenden. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sicherzugehen, dass Ihr Netzwerk passend zu WPA2 konfiguriert ist.

Wurde Ihr Netzwerk bereits vor einiger Zeit eingerichtet oder von einem Dienstleister (z. B. Berater oder Netzbetreiber) konfiguriert, lohnt es sich womöglich zu überprüfen, ob es so sicher wie möglich konfiguriert ist. Ist Ihr Netzwerk für eine ältere Generation von Sicherheitstechnik (WEP oder WPA) konfiguriert, empfiehlt Wi-Fi Alliance® eine Umstellung auf WPA2. WPA2 ist seit 2006 Voraussetzung für alle Wi-Fi CERTIFIED-Produkte.

Die allermeisten heutzutage genutzten Wi-Fi CERTIFIED-Geräte sind WPA2-fähig.

## 2.2. Passphrase-Qualität & -Verwendungsdauer

Eine sichere Netzwerk-Passphrase steigert maßgeblich die Netzwerksicherheit. Deshalb ist es wichtig, eine wirksame Passphrase auszuwählen. Ist die Passphrase länger, komplexer und zufälliger gewählt, erhöht dies ihre Sicherheit. Die Wi-Fi Alliance empfiehlt für Passphrasen eine Länge von mindestens acht Stellen sowie eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben und Zeichen. Eine Passphrase sollte kein Wort, das in Wörterbüchern zu finden ist, und keinerlei persönliche Daten (Identifikationsnummer, Name, Adresse etc.) enthalten.

Auch ein regelmäßiges Ändern der Passphrase für Ihr Netzwerk erhöht die Sicherheit.


Mehr unter: <http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf>

# 11. Wi-Fi – Rechtliche Informationen


## 2.3. WLAN-Einrichtung

Die HYDRIM-Einheit ermöglicht die Verwendung von WLAN- (Funk) und Kabelanschlüssen, aber nicht beides gleichzeitig.

### 2.3.1. Wahl zwischen Kabel- und WLAN-Netzwerken

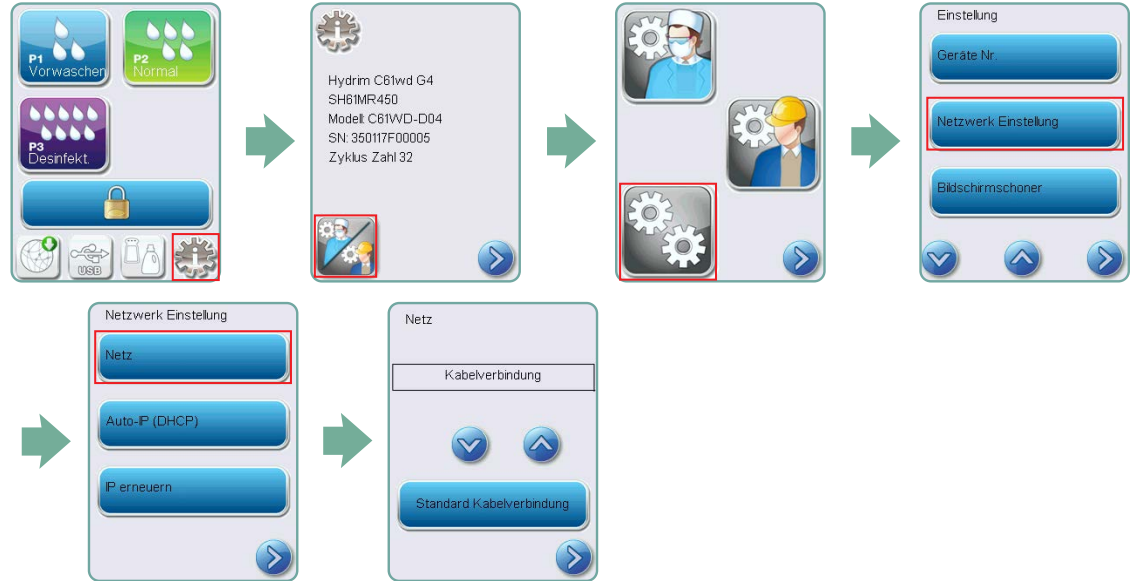

### 2.3.2. Anschluss an ein WLAN-Netzwerk

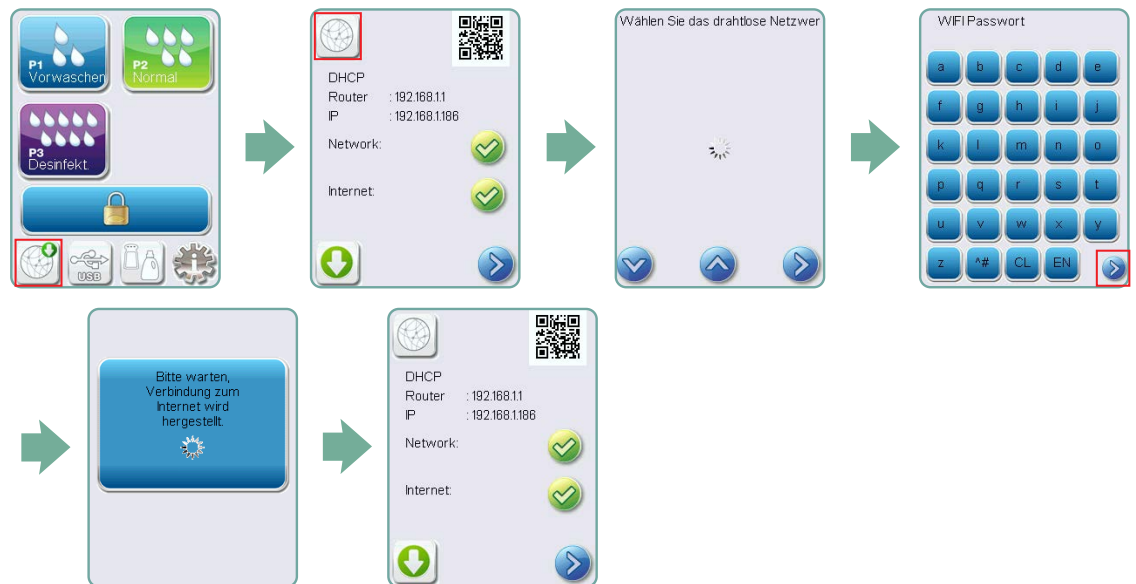

# 11. Wi-Fi – Rechtliche Informationen

## 3. USA – Federal Communications Commission (FCC)

### 3.1. Genehmigte kabellose Geräte

Dieser Abschnitt gibt die FCC ID und die Modellnummer des kabellosen Geräts an

### 3.2. Vorinstallierter WLAN-Adapter

FCC ID: YOPGS2011MIE (Modell: GS2011MIE)

### 3.3. Position der FCC ID

**3.3.1.** Auf der Rückseite Ihres HYDRIM finden Sie ein Kennschild im Format „enthält FCC ID YOPGS2011MIE“, dabei steht YOPGS2011MIE für die FCC ID, die zu Ihrem vorinstallierten WLAN-Modul gehört.

### 3.4. Einhaltung der FCC-Vorgaben zur HF-Belastung

Die von der an die WLAN-Karte angeschlossenen Hauptantenne abgestrahlte Gesamtenergie entspricht dem FCC-Grenzwert der SAR-Anforderung (spezielle Absorptionsrate) bezüglich 47 CFR, Teil 2, Abschnitt 1093, als der HYDRIM getestet wurde. Die Übertragungsantenne für die WLAN-Karte befindet sich an der Frontblende.

### 3.5. Anforderungen zur Funkfrequenz-Störsicherheit

Das Gerät wurde geprüft und die Einhaltung der Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B nach FCC Teil 15, Unterabschnitt B, festgestellt.

Wenn Sie mit dem WLAN-Gerät keine Verbindung herstellen können, kann es an Unterschieden bei der Kanalzuteilung liegen, dass diese Kanäle in Ihrer Region oder wegen Störungen nicht verfügbar sind. Sollte dieses Problem auftreten, muss eine Ethernet-Verbindung verwendet werden.

## 4. Kanada – Industry Canada (IC)

### 4.1. Genehmigte kabellose Geräte

Dieser Abschnitt gibt die IC-Zertifizierung und die Modellnummer jedes kabellosen Geräts an.

### 4.2. Vorinstallierter WLAN-Adapter

IC:9154A-GS2011MIE (Modell GS2011MIE)



# 11. Wi-Fi – Rechtliche Informationen

## 4.3. Lizenzfreie Niederleistungs-Funkgeräte (RSS-210)

Der Betrieb unterliegt den zwei folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, darunter Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb des Geräts führen können. Die Übertragungsgeräte sind auf den Betrieb mit Antennen ausgelegt, die im HYDR/M integriert sind und eine maximale Verstärkung von 3 dBi haben.

## 4.4. Belastung von Menschen durch HF-Felder (RSS-102)

Die HYDR/M-Einheit verwendet eine Niederleistungs-Integralantenne, die kein HF-Feld erzeugt, das über die Grenzwerte von Health Canada für die Allgemeinbevölkerung hinausgeht. Siehe Safety Code 6, erhältlich auf der Website von Health Canada unter <http://www.hc-sc.gc.ca/>

Die abgestrahlte Energie von an WLAN-Adapter angeschlossenen Antennen entspricht dem IC-Grenzwert der Anforderungen für die HF-Belastung bezüglich IC RSS-102, Ausgabe 2, Satz 4.1

## 5. Anmerkung zu elektronischen Emissionen

### 5.1. Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (FCC-Konformitätserklärung)

**Hinweis:** Die Funkadapter (Modell: GS2011MIE) haben das Zertifizierungsverfahren zur Einhaltung von FCC Teil 15, Unterabschnitt B unter der jeweiligen FCC ID-Nummer durchlaufen.

Das Gerät wurde geprüft und die Einhaltung der Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B nach den Regeln in FCC Teil 15, Unterabschnitt B, festgestellt. Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt, angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzstrahlung abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann es zu Beeinträchtigungen bei Funkverbindungen führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass nicht bei bestimmten Installationen Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Funkstörungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüft werden kann, können Sie gerne versuchen, die Störung durch folgende Maßnahmen zu beheben:

# 11. Wi-Fi – Rechtliche Informationen

Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder versetzen Sie diese.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an oder an einen Stromkreis, an den der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder Servicemitarbeiter.

SciCan LTD. übernimmt keinerlei Verantwortung für Störungen des Radio- und Fernsehempfangs, die durch nicht genehmigte Veränderungen und Modifikationen am Gerät verursacht werden. Nicht genehmigte Veränderungen und Modifikationen können zum Entzug der Betriebserlaubnis des Benutzers für dieses Gerät führen. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Der Betrieb unterliegt den zwei folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, darunter Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb des Geräts führen können.

Verantwortliche Stelle:

SciCan Ltd.  
1440 Don Mills Road  
Toronto, Ontario, Kanada  
M3B 3P9  
Telefon: 1.800.667.7733



## 5.2. Erklärung zur Einhaltung der Emissionsanforderungen von Industry Canada Klasse B

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Industrienorm ICES-003.

## 5.3 Europa: EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinie: EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie). Die Befolgung dieser Richtlinie beinhaltet Übereinstimmung mit den in der EU-Konformitätserklärung angegebenen harmonisierten EU-Normen.