

**Enthält/contains/contient/contiene:**

Potassium Caroate, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sodium Carbonate, Sorbitol, VP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Aroma, CI 73015.

**Reinigungstablette für Zahnschienen**

**Cleansing tablet for dental splints**

**Comprimé à nettoyage pour gouttières dentaires**

**Comprimido para la limpieza de férulas dentales**

**Compressa per la pulizia dei bite**

**Tabletki do profesjonalnego czyszczenia szyn**

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 032**  
32 Tabs



**Oxydens Clean-set**

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 030**  
1 Oxydens Clean-set (box + cup) • 32 Tabs



**Oxydens Clean-box**

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 031**  
5 Oxydens Clean-boxes



**Oxydens Clean-cup**

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 033**  
5 Oxydens Clean-cups



**Reinigungstablette für Zahnschienen:**

Knirscherschienen, Retainer, Playsafe Sportmundschutz, Silensor-sl Schnarchschutz, kieferorthopädische Apparaturen, Korrekturschienen, Prothesen usw.

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken!

Von Kindern fernhalten!



Augenkontakt vermeiden!

**Gebrauchsinformationen:**

- Den Oxydens Clean-cup mit warmem Wasser bis an die Oberkante des Sichtfensters füllen.
- /3. Eine Oxydens Tablette und die zu reinigende Zahnschiene in die Oxydens Clean-box legen.
- Die geschlossene Clean-box für ca. 15 Min. in den Clean-cup stellen.
- Die Schiene durch die Clean-box von beiden Seiten gründlich durchspülen, Wasser ausschütten und die Schiene in der Clean-box aufbewahren.
- Vor dem Gebrauch die Schiene immer nochmal mit Wasser abspülen.

Ohne Oxydens Cleanset:

- Eine Oxydens Tablette in ein Glas mit warmem Wasser geben.
- Die Zahnschiene in das Glas einlegen.
- Die Zahnschiene für ca. 15 Min. im Glas lassen.
- Die Schiene jetzt und vor dem Gebrauch gründlich mit Wasser abspülen.

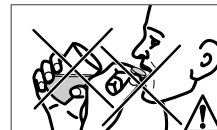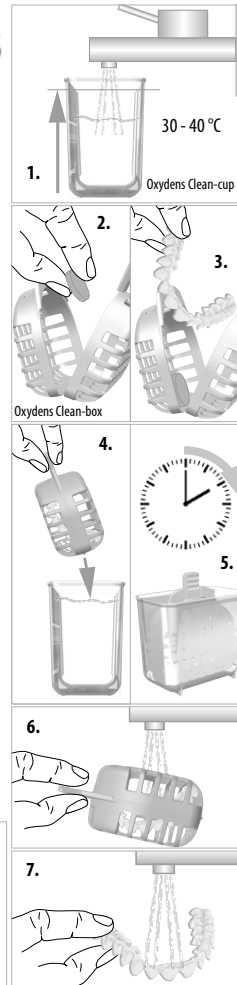

**Cleansing tablet for dental splints:**

nightguards, retainer, Playsafe sports-mouthguard, Silensor-sl anti-snoring device, orthodontic devices, corrective splints, dentures and more

Harmful if swallowed!

Keep away from children!

Avoid contact with eyes!

**Direction for use:**

- Fill the Oxydens Clean-cup with warm water up to the upper end of the clear window.
- Place one Oxydens tablet and the splint to be cleaned into the Oxydens Clean-box.
- Put the closed Clean-box into the Clean-cup for approx. 15 min.
- Rinse well the splint through the Clean-box from both sides. Shake out water and store the splint in the Clean-box.
- Rinse the splint one more time with water before use.

Without Oxydens Clean-set:

- Drop one Oxydens tablet into a glass with warm water.
- Put the splint into the glass.
- Leave the splint for approx. 15 min. in the glass.
- Rinse well the splint now and before use with water.

## Comprimé à nettoyage pour gouttières dentaires:

gouttières de grincement, attachements, protége-dents Playsafe, anti-ronfleur Silensor-sl, appareils orthodontiques, gouttières de correction, prothèses etc.

### Nocif par ingestion!


Tenez éloigné des enfants!  
Éviter tout contact avec les yeux!

### Instructions d'usage:

1. Remplir le gobelet „Oxydens Clean-cup“ avec de l'eau chaude jusqu'au bord supérieur de la fenêtre.
- 2./3. Mettre un comprimé Oxydens et la gouttière à nettoyer dans la boîte „Oxydens Clean-box“.
- 4./5. Placer la boîte „Oxydens Clean-box“ pour approx. 15 mn. dans le gobelet „Oxydens Clean-cup“.
6. Rincer la gouttière soigneusement des deux côtés, secouer l'eau et garder la gouttière dans la boîte „Oxydens Clean-box“.
7. Avant l'usage de la gouttière à nouveau rincer à l'eau.

### Sans jeu Oxydens Clean-set:

1. Mettre un comprimé Oxydens dans un verre avec de l'eau chaude.
2. Placer la gouttière dans le verre.
3. Laisser la gouttière pour env. 15 mn dans le verre.
4. Maintenant et avant l'usage rincer la gouttière soigneusement à l'eau.

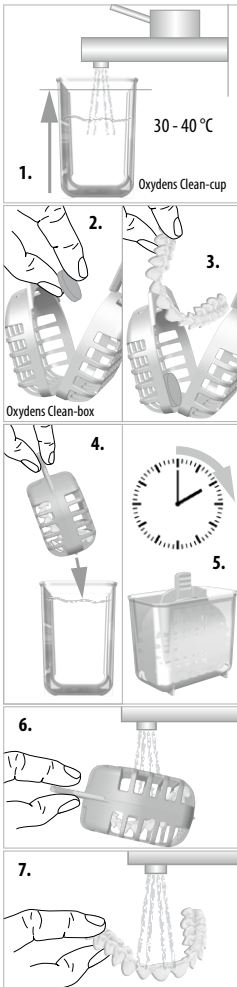

## Comprimado para la limpieza de férulas dentales:

férulas nocturnas, retenedores, Playsafe protectores bucales deportivos, Silensor-sl sistemas anti-ronquido, aparatos de ortodoncia, férulas correctoras, etc...

### Nocivo si se ingiere!

Mantener alejado de los niños!  
Evite el contacto con los ojos!

### Instrucciones de uso:

1. Llene el „Oxydens Clean-cup“ con agua caliente hasta el extremo superior de la ventana transparente.
- 2./3. Coloque un comprimido Oxydens junto con la férula a limpiar en el recipiente „Oxydens Clean-box“.
- 4./5. Ponga el recipiente cerrado „Oxydens Clean-box“ dentro de la taza „Oxydens Clean-cup“ durante 15 minutos aproximadamente.
6. Enjuague bien la férula a través del „Oxydens Clean-box“ por ambos lados. Sacuda el agua y deje la férula en el „Oxydens Clean-box“.
7. Enjuague la férula una vez más con agua antes de su uso.

### Sin el Oxydens Clean-set:

1. Coloque un comprimido en un vaso con agua caliente.
2. Ponga la férula en el vaso.
3. Deje la férula sumergida en el vaso durante 15 minutos aproximadamente.
4. Enjuague bien la férula entonces y antes de su uso con agua.

## Compressa per la pulizia dei bite:

bite notturni, retainer, Playsafe para-denti sportive, Silensor-sl apparecchio antirussamento, apparecchi ortodontici, placchette di correzione, protesi mobili e altro.

### Nocivo per ingestione!


Tenere lontano dai bambini!  
Evitare il contatto con gli occhi!

### Istruzioni d'uso:

1. Riempire Oxydens Clean-cup con acqua tiepida fino al margine superiore della finestra trasparente.
- 2./3. Mettere una compressa di Oxydens e il bite da pulire in Oxydens Clean-box.
- 4./5. Introdurre il Clean-box nel Clean-cup per ca. 15 min.
6. Lasciando il bite dentro il Clean-box risciacquare bene da entrambi i lati. Agitare il bite per rimuovere l'acqua e riporlo nel Clean-box.
7. Risciacquare nuovamente il bite con acqua fredda prima dell'uso.

### Senza Oxydens Clean-set:

1. Sciogliere una compressa in un bicchiere con acqua tiepida.
2. Mettere il bite nel bicchiere.
3. Lasciare il bite per ca. 15 min. nel bicchiere.
4. Risciacquare bene il bite con acqua fredda. E'opportuno risciacquare nuovamente il bite prima dell'utilizzo.

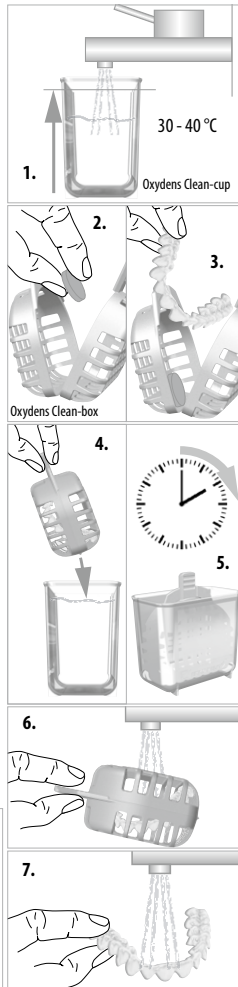

## Tabletki do profesjonalnego czyszczenia szyn:

szyny przeciw bruksizmowi, retainery, szyny ochronne dla sportowców Playsafe, szyny zabezpieczające przed chrapaniem Silensor-sl, aparaty ortodontyczne, szyny korekcyjne, protezy itp.

**Szkodliwy w przypadku połknięcia Chronić! Chronić przed dziećmi!**

**Unikać kontaktu z oczami!**

### Informacje dotyczące użytkowania:

1. Kubeczek do czyszczenia Oxydens napelnić ciepłą wodą do górnej krawędzi okienka.
- 2./3. W pudełku do czyszczenia Oxydens umieścić jedną tabletkę Oxydens oraz szynę przeznaczoną do czyszczenia.
- 4./5. Zamknięte pudełko włożyć do kubeczka czyszczącego na około 15 minut.
6. Umieszczoną w pudełku do czyszczenia szynę wypłukać dokładnie wodą z obu stron, wstrząsając pudełkiem w celu usunięcia wody i pozostawić szynę w pudełku.
7. Przed użyciem szynę ponownie wypłukać w wodzie.

### Postępowanie w przypadku braku zestawu do czyszczenia Oxydens:

1. Jedną tabletkę Oxydens umieścić w szklance ciepłej wody.
2. Do szklanki włożyć szynę.
3. Pozostawić szynę w szklance na około 15 minut.
4. Szynę wypłukać dokładnie wodą; przed założeniem szynę należy ponownie wypłukać wodą.