




MANUTENZIONE DEI CONTRANGOLI BIEN-AIR.

Riferirsi alle istruzioni per l'uso per le procedure complete di manutenzione, pulizia e sterilizzazione. Questo dispositivo medico è fornito «non sterile». Prima di utilizzarlo attenersi alla presente procedura.

1 PREPARAZIONE

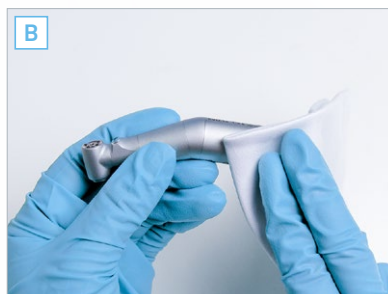

A. ESTRAZIONE DELLA FRESA



- Togliere lo strumento rotante dal sistema di bloccaggio
- Staccare il contrangolo dal micromotore

B. PRE-DISINFEZIONE

- Disinfezione esterna

⊘ Non immergere lo strumento in un bagno disinfettante.

2 PULIZIA

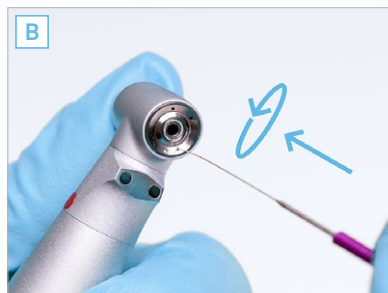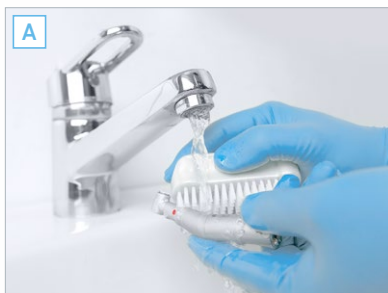

A. PULIRE CON ACQUA CORRENTE <38 °C

B. CURETTAGE

- Rimuovere accuratamente la sporcizia e gli eventuali depositi dagli ugelli con lo specillo
- Asciugare gli ugelli con aria compressa e il resto dello strumento con un panno

⊘ Non immergere in un bagno ad ultrasuoni

C. PULIZIA INTERNA ED ESTERNA CON SPRAYNET

- Agitare il flacone Spraynet prima dell'uso
- Utilizzare la punta Spraynet ①*
- Tenere lo strumento con la testa rivolta verso il basso protetta da un panno assorbente e premere il pulsante dello Spraynet per 1 secondo
- Pulire l'esterno del contrangolo con un panno imbibito di Spraynet



3 DISINFEZIONE



A. DISINFEZIONE CON UN DISINFETTANTE PER SUPERFICI (osservare le istruzioni per l'uso del produttore)

⊘ **Non immergere lo strumento in un bagno disinfettante.**

OPPURE

B. TERMODISINFEZIONE
(osservare le istruzioni per l'uso del produttore)



4 LUBRIFICAZIONE



A. LUBRIFICAZIONE CON LUBRIFLUID

- Agitare il flacone Lubrifluid prima dell'uso
- Utilizzare la punta Lubrifluid ①*
- Tenere lo strumento con la testa rivolta verso il basso protetta da un panno assorbente e premere il pulsante del Lubrifluid per 1 secondo
- Eseguire quindi una prova di funzionamento a bassa velocità per 30 secondi al fine di eliminare l'eventuale lubrificante in eccesso
- Stoccaggio immediato: riporre gli strumenti con la testa rivolta verso il basso affinché i residui di olio possano defluire.

5 STERILIZZAZIONE



A. PORRE IL CONTRANGOLO IN UN SACCHETTO DI STERILIZZAZIONE

B. STERILIZZARE SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE

- Gli strumenti contrassegnati con il simbolo  sono sterilizzabili in autoclave

⚠ **Sterilizzare esclusivamente strumenti puliti e lubrificati**


* Tutti i codici articolo delle punte sono riportati sull'ultima pagina del presente documento.

MANUTENZIONE


ACCESSORI




SPRAYNET
 Spray per pulizia 500 ml
 Confezione da 6 flaconi
 ART. 1600036-006

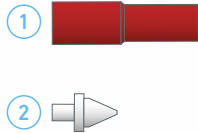

LUBRIFLUID
 Lubrificante 500 ml
 Confezione da 6 flaconi
 ART. 1600064-006

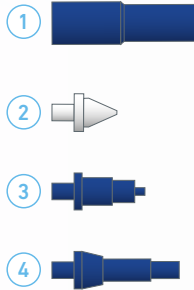

AQUACARE
 Spray per pulizia 500 ml
 Confezione da 6 flaconi
 ART. 1600617-006

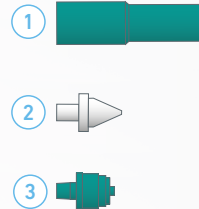

LUBRICARE
 Sistema per la
 manutenzione
 ART. 1600915-001



LUBRIMED
 Confezione da 6 cartucce
 ART. 1600037-006



SPECILLI
 Confezione da 10
 ART. 1000001-010