




neodisher[®] IP Spray



Onderhoudsmiddel voor instrumenten

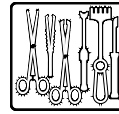

Spray

Toepassingsgebied:

- Handmatig onderhoud van chirurgische instrumenten, met name gelede instrumenten

Werkingscapaciteit:

- Voor de specifieke verzorging van chirurgische instrumenten na machinale reiniging, als de in het reinigungs- en desinfectie-apparaat uitgevoerde instrumentverzorging onvoldoende is voor gelede instrumenten of als in het reinigungs- en desinfectie-apparaat geen dosering van neodisher IP Konz wordt uitgevoerd
- Bij het beoogde gebruik van neodisher IP Spray zijn er geen gevolgen voor de biocompatibiliteit van de behandelde instrumenten (Biologische beoordeling van medische hulpmiddelen conform EN ISO 10993-1)

Bijzondere eigenschappen:

- Op basis van medische witte olie (sterk gezuiverde paraffineolie voor farmaceutisch gebruik)
- Veroorzaakt geen afzettingen
- Het is bewezen dat het middel de daaropvolgende sterilisatie met stoom of hete lucht niet beïnvloedt

Toepassing en dosering:

Spuit de instrumenten speciaal in met neodisher IP spray, vooral in het scharniergebied. Houd de spuitbus tijdens het spuiten zo verticaal mogelijk. Gebruik de spuitbus met de verkorte sproeibuis om over zeefbakken te spuiten. Trek hiervoor de buis van het opzetstuk en knip deze met een schaar op de gewenste lengte af. Plaats vervolgens de sproeibuis met de ingekorte zijde weer in het sproeiopzetstuk, zodat het sproeipatroon optimaal wordt en niet vervalst kan worden door de snijrand.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.

- Neem de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen in acht met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664.

Ingrediënten:


Paraffineolie volgens Ph. Eur. voor farmaceutisch gebruik, niet-ionogene tensiden, drijfgas (propaan/butaan)

CE-markering:

neodisher IP Spray voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie ervan op de hoogte te worden gesteld.

Opslaginstructies:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 5 en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 jaar houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op de onderkant van de spuitbus achter het symbool .

Gevaren- en veiligheidsinstructies

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten afvoeren. Afvoer van productresten: zie veiligheidsinformatieblad. Houder staat onder druk. Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50 °C. Na gebruik niet openbreken of in brand steken.

MB 4304/3-1
Versie: 01/2020