



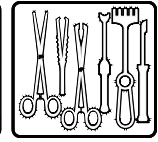

neodisher® PreStop

New

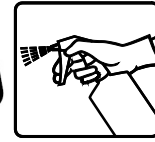

Voorbehandelingsmiddel met corrosiebescherming voor chirurgische instrumenten

Gebruiksklare Spray foam

Belangrijkste toepassingsgebied:

- Voorbehandelingsmiddel en corrosieremmer voor het spuiten op chirurgische instrumenten direct na operaties.

Eigenschappen:

- Voorkomt (put)corrosie op roestvrij stalen instrumenten veroorzaakt door bloedresten of zoutoplossing.
- Zelfwerkzame voorreiniging, al in de OK.
- Geschikt voor chirurgische en MIS instrumenten.
- Geanodiseerd aluminium moet worden getest op geschiktheid voor gebruik.

Speciale eigenschappen:

- Voorkomt het indrogen van operatie residuen, door de instrumenten vochtig te houden.
- Vergemakkelijkt de latere reiniging.
- Remt de groei van micro-organismen op instrumenten tijdens de contacttijd (bacteriostatisch).

Dosering en gebruik:

Onverdunde neodisher PreStop sproeien (met behulp van het spuihulpstuk) op de chirurgische instrumenten, die in de afvoercontainers worden geplaatst, direct na operaties. Zorg voor een volledige bevochtiging. Instrumenten behandeld met neodisher PreStop kunnen tot wel 72 uur worden bewaard, daarna goed afspoelen en als gebruikelijk reinigen.

Algemene gebruiksinstructie:

- Alleen voor professioneel gebruik!
- Niet vermengen met andere producten.
- De reiniging en desinfectie moet in overeenstemming met de richtlijn voor medische hulpmiddelen worden uitgevoerd in passende gevalideerde processen.
- Let ook op de aanwijzingen van de instrumenten fabrikant voor reinigen en desinfecteren volgens de DIN en ISO 17664 richtlijnen.

- Geanodiseerd aluminium moet worden getest op geschiktheid voorafgaand aan gebruik.
- Gebruik de meegeleverde schuimspray om neodisher PreStop aan te brengen.
- neodisher PreStop moet worden afgespoeld met water (bij voorkeur demi).

Product gegevens:

pH-waarde	ongeveer 9.5 (concentraat, 20 °C)
Soortelijk gewicht	1.04 g/cm ³ (20 °C)

Samenstelling:

< 5 % anionische tensiden en amfotere tensiden, enzymen en conserveermiddel (3-Iodo-2-propinyl butylcarbamate, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one).

CE-markering: CE

neodisher PreStop voldoet aan de Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

Opslag informatie:

Vorstvrij, altijd bij een temperatuur tussen 0 en 25 °C. Verpakking goed gesloten houden.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maanden.

Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de stempel op het etiket achter het zandloper

Symbol

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

neodisher PreStop is geen gevaargoed, volgens de CLP richtlijn 1272/2008.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen.

Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).

Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 4086/2-3
Versie: 08/2019
Vervangt: 06/2018