


## POLISSOIR UPOFIX®

Brossage	Utilisation	Domaine d'application
0	Polissage	tous les métaux
I	Prépolissage	tous les métaux
II	Polissage brillant	tous les métaux
III	Prépolissage	Céramique
IV	Polissage brillant	Céramique
IV	Prépolissage	Composite
V	Polissage brillant	Composite
Attention : 3' – 5000 tr/min (lentement avec pression élevée)		

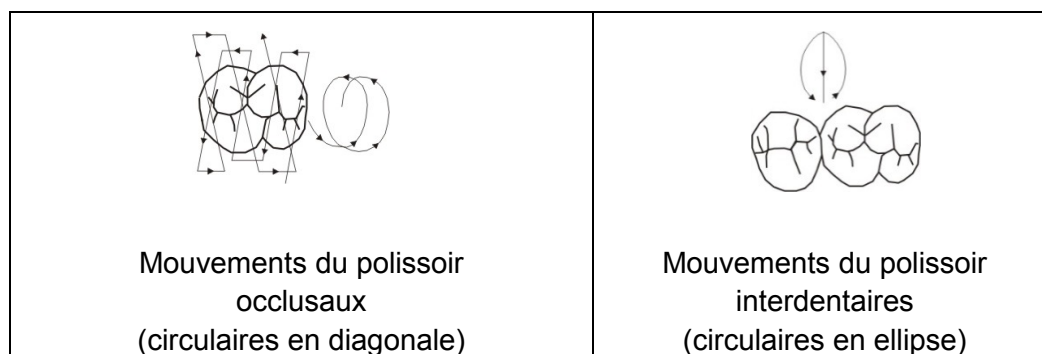

Vitesses lentes de rotation – 3000 tr/min et pression élevée : (Pré)polissage abrasif

Vitesses élevées de rotation 3000-5000 tr/min avec pression légère à nulle : Polissage final.

Autres informations, voir description dans le catalogue de laboratoire.

**Fabricant :**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstrasse 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rév. 12/14